



Hillrom™

**Welch Allyn®
iExaminer™ Pro**



Aplikacja Welch Allyn iExaminer Pro

Otoskop Welch Allyn MacroView Plus 238-3

Oftalmoskop Welch Allyn PanOptic Plus 118-3

Oftalmoskop Welch Allyn PanOptic Plus 118-3-US

Nakładka Welch Allyn SmartBracket 11840-IEX

Nakładka Welch Allyn SmartBracket 11840-IEX-US

Instrukcja obsługi

Wersja oprogramowania 4.0.x dla systemu iOS

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych

R_x ONLY

Tryb pracy: patrz instrukcja obsługi odpowiedniej głowicy

© 2023 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie albo powielanie niniejszej instrukcji obsługi bądź jej części w jakiegokolwiek formie bez pozwolenia firmy Welch Allyn jest niedozwolone. Welch Allyn® jest znakiem towarowym spółki Welch Allyn, Inc. Hillrom™ jest znakiem towarowym spółki Hill-Rom Services, Inc.

App Store® jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Apple, Inc. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Firma Hill-Rom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, danych technicznych oraz modelach produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyną gwarancją, jakiej udziela firma Hill-Rom, jest wyraźna gwarancja pisemna udzielona w trakcie sprzedaży lub dzierżawy wyrobów.

Firma Welch Allyn, Inc. („Welch Allyn”) nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała powstałe wskutek (i) nieprawidłowego użytkowania produktu w sposób niezgodny z instrukcjami, przestrogami, ostrzeżeniami lub wytycznymi w zakresie przeznaczenia produktu opisanymi w niniejszej instrukcji lub (ii) użytkowania produktu w sposób niewłaściwy bądź niezgodny z przepisami prawa.

PATENT/PATENTY hillrom.com/patents


Produkt może być chroniony co najmniej jednym patentem. Więcej informacji można znaleźć pod powyższym adresem internetowym. Firmy należące do grupy Hill-Rom są właścicielami patentów i rozpatrywanych wniosków patentowych w Europie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Dział pomocy technicznej Welch Allyn

<https://hillrom.com/en-us/about-us/locations>

Informacja dla użytkowników lub pacjentów na terenie UE: Wszelkie poważne wypadki, które miały związek z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent.

 901161 iEXAMINER PRO SW APP iOS

 80030289, wer. A, data aktualizacji: 2023-03

 Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA
hillrom.com

Welch Allyn, Inc. jest jednostką zależną spółki Hill-Rom Holdings, Inc.

Wyprodukowano w USA

Spis treści

Opis urządzenia	1
Przeznaczenie	1
Aplikacja iExaminer	1
System iExaminer z oftalmoskopem PanOptic Plus na terenie USA	2
System iExaminer z oftalmoskopem PanOptic Plus poza terenem USA.....	2
System iExaminer z otoskopem MacroView Plus.....	3
Przeciwwskazania	3
Charakterystyka działania	3
Definicje symboli.....	4
Ostrzeżenia i przestrogi	5
Ryzyko resztkowe.....	6
Urządzenie i dane pacjentów a bezpieczeństwo .	7
Pierwsze użycie	8
Wytyczne dotyczące wyboru smartfona i obudowy.....	9
Sprawdzanie zmontowanego układu	11
Korzystanie z funkcji aplikacji.....	13
Instrukcja dla systemu iOS	14
Elementy dostępne na ekranie (iOS)	14
Modyfikowanie ustawień (iOS)	15
Uwierzytelnianie (iOS)	16
Ustawianie hasła (iOS)	16
Resetowanie hasła (iOS)	17
Logowanie (iOS)	18
Badania, których ważność wygasła (iOS)	19
Badania, których ważność wkrótce wygaśnie (iOS).....	24

Dodawanie badania (iOS)	25
Rejestracja obrazów (iOS)	26
Wybór obrazów (iOS).....	29
Wyświetlanie wybranego obrazu (iOS).....	30
Zapisywanie badania (iOS)	32
Aktualizacja zapisanego badania (iOS)	33
Udostępnianie badania (iOS).....	35
Udostępnianie obrazu (iOS)	37
Usuwanie badania (iOS)	39
Odrzucanie badania (iOS)	40
Czyszczenie	41
Bezpieczna utylizacja	42
Zgodność elektromagnetyczna	42
Przechowywanie i transport	43
Rozmiar piksela	43
Zgodność	43
Akcesoria	43
Zgodne urządzenia.....	43
Gwarancja	44

Opis urządzenia

Aplikacja iExaminer jest odpowiednikiem aplikacji Welch Allyn iExaminer Pro.

System iExaminer z oftalmoskopem PanOptic Plus składa się z oftalmoskopu PanOptic Plus, nakładki SmartBracket, uchwytu SmartClip, aplikacji iExaminer i jednego z następujących urządzeń: iPhone X, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro z obudową spełniającą [„Wytyczne dotyczące wyboru smartfona i obudowy”](#).

System iExaminer z otoskopem MacroView Plus składa się z otoskopu MacroView Plus, nakładki SmartBracket, uchwytu SmartClip, aplikacji iExaminer oraz smartfona z obudową spełniającą [„Wytyczne dotyczące wyboru smartfona i obudowy”](#).

Przeznaczenie

Aplikacja iExaminer

Aplikacja iExaminer wraz z odpowiednimi wyrobami firmy Welch Allyn jest przeznaczona do stosowania przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny w celu rejestrowania i przesyłania obrazów pacjentów dorosłych i dzieci.

Aplikacja iExaminer jest przeznaczona do użytku w profesjonalnych placówkach opieki zdrowotnej, takich jak gabinety lekarskie, szpitale, gabinety specjalistyczne, oddziały ratunkowe, przychodnie i ośrodki szkoleń medycznych.

System iExaminer z oftalmoskopem PanOptic Plus na terenie USA

System iExaminer z oftalmoskopem PanOptic Plus służy do wykonywania zdjęć oczu i ich okolic.

System iExaminer z oftalmoskopem PanOptic Plus jest przeznaczony do użytku w profesjonalnych placówkach opieki zdrowotnej, takich jak gabinety lekarskie, szpitale, gabinety specjalistyczne, oddziały ratunkowe i ośrodki szkoleń medycznych.

Użytkownicy docelowi to licencjonowani pracownicy ochrony zdrowia przeszkoleni w zakresie obsługi oftalmoskopu (lub stażyści pod ich nadzorem). Docelowe populacje pacjentów to dzieci i dorośli.

Wskazania

System iExaminer z oftalmoskopem PanOptic Plus składa się z oftalmoskopu PanOptic Plus, nakładki SmartBracket, uchwytu SmartClip, aplikacji iExaminer i jednego z następujących urządzeń: iPhone X, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro. System jest przeznaczony do rejestracji obrazów, które stanowią pomoc dla lekarzy w ocenie i dokumentacji stanu zdrowia oczu. Obrazy z systemu iExaminer z oftalmoskopem PanOptic Plus nie powinny być używane jako jedyna podstawa do ustalania rozpoznania.

System iExaminer z oftalmoskopem PanOptic Plus poza terenem USA

System iExaminer z oftalmoskopem PanOptic Plus jest przeznaczony do stosowania przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny w celu rejestracji i przesyłania obrazów oczu pacjentów dorosłych i dzieci.

System iExaminer z oftalmoskopem PanOptic Plus jest przeznaczony do użytku w profesjonalnych placówkach opieki zdrowotnej, takich jak gabinety lekarskie, szpitale, gabinety specjalistyczne, oddziały ratunkowe, przychodnie i ośrodki szkoleń medycznych.

System iExaminer z otoskopem MacroView Plus

System iExaminer z otoskopem MacroView Plus jest przeznaczony do stosowania przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny w celu rejestracji i przesyłania obrazów ucha zewnętrznego, kanału słuchowego oraz błony bębenkowej pacjentów dorosłych i dzieci.

System iExaminer z otoskopem MacroView Plus jest przeznaczony do użytku w profesjonalnych placówkach opieki zdrowotnej, takich jak gabinety lekarskie, szpitale, gabinety specjalistyczne, oddziały ratunkowe, przychodnie i ośrodki szkoleń medycznych.



UWAGA Smartfona należy używać wyłącznie w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.

Przeciwwskazania

System iExaminer z otoskopem MacroView Plus nie jest przeznaczony do badania oka.

Nie ma przeciwwskazań do stosowania aplikacji iExaminer. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi odpowiedniego wyrobu firmy Welch Allyn.

Charakterystyka działania

Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi odpowiedniego wyrobu firmy Welch Allyn.

Definicje symboli

Informacje o pochodzeniu tych symboli można znaleźć w słowniczku symboli firmy Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary.



OSTRZEŻENIE Ostrzeżenia w niniejszej instrukcji określają warunki bądź działania, które mogą prowadzić do wystąpienia choroby, urazu albo zgonu. W dokumencie czarno-białym symbole ostrzeżeń zamieszczono na szarym tle.



PRZESTROGA Przestrogi w niniejszej instrukcji określają warunki bądź działania, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu albo innego mienia bądź utratę danych.



UWAGA Oznacza wyjaśnienie instrukcji bądź użyteczną informację na temat funkcji albo działania.



Zapoznać się z instrukcją obsługi.

Egzemplarz instrukcji obsługi jest dostępny na podanej stronie internetowej. Papierowy egzemplarz instrukcji obsługi można zamówić w firmie Hillrom (dostawa w ciągu 7 dni kalendarzowych).

R_x ONLY

Tylko na receptę lub „do użytku przez uprawnionego lekarza specjalistę lub na jego zlecenie”



Numer do zamówień



Identyfikator produktu



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu





Producent





Data produkcji


Ostrzeżenia i przestrogi


 **OSTRZEŻENIE** Do przesyłania obrazów albo dokumentacji pacjentów należy zawsze używać aplikacji iExaminer. Nie należy wysyłać obrazów pacjentów z poziomu folderu aparatu, ponieważ grozi to przypisaniem niewłaściwego obrazu do pacjenta. Korzystanie z folderu aparatu należy ograniczyć wyłącznie do celów szkoleniowych i nieklinicznych. Patrz [Urządzenie i dane pacjentów a bezpieczeństwo](#).


 **OSTRZEŻENIE** Z tego urządzenia/systemu może korzystać wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny. Urządzenie/system może wywoływać zakłócenia radiowe albo zakłócać działanie pobliskich urządzeń. Konieczne może być podjęcie środków zaradczych, takich jak zmiana orientacji albo położenia urządzenia bądź ekranowanie lokalizacji.


 **OSTRZEŻENIE** Ryzyko urazu pacjenta — pola magnetyczne. Należy zachować ostrożność podczas korzystania ze smartfona w pobliżu wszczepionych urządzeń, m.in. implantów czaszkowych, regulowanych zastawek płynu mózgowo-rdzeniowego i rozruszników serca.


 **OSTRZEŻENIE** Obrazy z systemu iExaminer z oftalmoskopem PanOptic Plus nie powinny być używane jako jedyna podstawa do ustalania rozpoznania.

 **OSTRZEŻENIE** Nie należy używać systemu iExaminer w połączeniu z niezgodnymi modelami smartfonów.

 **PRZESTROGA** Oceny obrazów z systemu iExaminer firmy Welch Allyn należy dokonywać przy odpowiednim oświetleniu. Nie przebadano oceny obrazów w warunkach słabego oświetlenia.

 **PRZESTROGA** Aby zapewnić, że system będzie rejestrował obrazy wystarczającej jakości, należy sprawdzić, czy jest prawidłowo zmontowany. Patrz [Sprawdzanie zmontowanego układu](#).

 **UWAGA** Więcej ostrzeżeń i informacji o niebezpieczeństwie można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi wyrobu firmy Welch Allyn.

 **UWAGA** Więcej informacji o zagrożeniach związanych ze światłem można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi wyrobu firmy Welch Allyn.

Ryzyko resztkowe

Niniejszy wyrób jest zgodny z odpowiednimi normami dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych, bezpieczeństwa mechanicznego, wydajności i biogodności. Nie można jednak całkowicie wykluczyć możliwości odniesienia obrażeń przez pacjenta albo użytkownika, których przyczyną mogą być:

- zagrożenia elektromagnetyczne mogące skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem wyrobu;
- zagrożenia mechaniczne;
- zagrożenia związane z niedostępnością urządzenia, funkcji lub parametru;
- niewłaściwe użytkowanie, np. nieodpowiednie czyszczenie;
- narażenie wyrobu na działanie czynników biologicznych, które mogą wywołać ciężkie ogólnoustrojowe reakcje alergiczne.

Urządzenie i dane pacjentów a bezpieczeństwo

Firma Welch Allyn zaleca włączenie zabezpieczeń na poziomie samego urządzenia. Za bezpieczeństwo smartfonów odpowiadają użytkownicy.

Aplikacja iExaminer umożliwia użytkownikom przesyłanie danych pacjentów pocztą elektroniczną i ich udostępnianie w chmurze. Przesyłanie danych pacjentów pocztą elektroniczną albo ich udostępnianie w chmurze wymaga, aby użytkownik udostępniał dane wyłącznie innym uprawnionym użytkownikom zgodnie z przepisami Ustawy o przerośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA). Odpowiedzialność za ochronę danych pacjenta spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia tożsamości pacjenta przed przesłaniem dokumentacji pacjenta.

Aby bezpiecznie przesyłać dane pacjentów pocztą elektroniczną, użytkownik musi zapewnić, że konfiguracja aplikacji poczty elektronicznej umożliwia bezpieczną łączność z serwerem poczty elektronicznej z wykorzystaniem protokołu TLS (Transport Layer Security). TLS to protokoły kryptograficzne służące do zapewnienia bezpieczeństwa łączności w sieci komputerowej. Głównym celem TLS jest zapewnienie ochrony prywatności i rzetelności danych przesyłanych między co najmniej dwoma łączącymi się ze sobą aplikacjami komputerowymi.

Konfigurując konto poczty elektronicznej (np. IMAP, POP), użytkownik musi wybrać metodę bezpieczeństwa opartą na protokole TLS/SSL. Używana w połączeniu z domyślnym serwerem poczty elektronicznej iCloud domyślna aplikacja pocztowa środowiska iOS, aplikacja Mail, jest już zabezpieczona protokołem TLS.


Wysyłanie danych pacjentów w chmurze wymaga, aby metoda przechowywania w chmurze była zabezpieczona protokołem TLS. W systemie iOS dysk iCloud jest zabezpieczony protokołem TLS.


Pierwsze użycie

Materiały wideo na temat aplikacji iExaminer Pro znajdują się na stronie hillrom.com/getstarted.

Należy potwierdzić wykonanie poniższych czynności:

1. Wybrać smartfon, który spełnia [Wytyczne dotyczące wyboru smartfona i obudowy](#).
2. Pobrać aplikację iExaminer ze sklepu App Store®.
3. W przypadku aktualizacji poprzedniej wersji aplikacji, w której zapisane były obrazy, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Wybrać tryb pracy.
 - Tryb kliniczny jest przeznaczony do stosowania u pacjentów. Dane dotyczące badania muszą być wysyłane z aplikacji po każdym badaniu. Dane dotyczące badania nie są przechowywane w telefonie.
 - Tryb szkoleniowy jest przeznaczony do stosowania tylko podczas ćwiczeń. W przypadku wybrania tego trybu dane z badań próbnych można przechowywać przez czas określony przez użytkownika: od 30 dni do 180 dni. Po tym czasie dane należy usunąć z aplikacji. W tym trybie nie należy przechowywać danych osobowych ani danych pacjenta umożliwiających jego identyfikację. Domyślny okres przechowywania danych z badań próbnych wynosi 30 dni.
5. Zaakceptować regulamin użytkownika.
6. Skonfigurować opcje dotyczące bezpieczeństwa aplikacji i smartfona. Zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi poufności. Patrz [Urządzenie i dane pacjentów a bezpieczeństwo](#).

7. Patrz dokument **PIERWSZE KROKI — ZESTAW IEXAMINER Z NAKŁADKĄ SMARTBRACKET FIRMY WELCH ALLYN** (dołączono do opakowania z zestawem) w celu przeprowadzenia pierwszej konfiguracji. Na tylnej części obudowy musi być obecny obszar bez zdobień lub akcesoriów uniemożliwiających montaż nakładki SmartBracket i uchwytu SmartClip.
 8. Przymocować wyrób Welch Allyn do nakładki SmartBracket.
 9. Sprawdzić zmontowany układ za pomocą karty do sprawdzania rozdzielczości iExaminer (w zestawie). Patrz [Sprawdzanie zmontowanego układu](#).
 10. Materiały wideo i inne materiały szkoleniowe dotyczące przeprowadzania badania można znaleźć na stronie hillrom.com/getstarted.
-  **UWAGA** Aplikacja iExaminer 4.0.x jest zgodna z systemem iOS w wersjach od 11 do 15.

 **UWAGA** Aby zmienić tryb, należy odinstalować i ponownie zainstalować aplikację. Podczas odinstalowywania aplikacji wszystkie zapisane dane zostaną usunięte.

Wytyczne dotyczące wyboru smartfona i obudowy

Obudowa smartfona

Na tylnej części obudowy musi być obecny obszar bez zdobień lub akcesoriów uniemożliwiających montaż nakładki SmartBracket i uchwytu SmartClip. Patrz dokument **PIERWSZE KROKI — ZESTAW IEXAMINER Z NAKŁADKĄ SMARTBRACKET FIRMY WELCH ALLYN** (dołączono do opakowania z zestawem).

Kryteria wyboru smartfona

Na terenie USA w połączeniu z oftalmoskopem PanOptic Plus należy używać jednego z następujących urządzeń: iPhone X, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro.

W przypadku wszelkich pozostałych zastosowań systemu iExaminer należy użyć smartfona spełniającego poniższe kryteria.

- Rozmiar: całkowite wymiary smartfona wraz z obudową mniejsze niż 165 mm długości, 85 mm szerokości i 13 mm grubości.
- Masa: łączna masa smartfona i obudowy poniżej 280 g.
- Układ optyczny: akceptowalna jest większość używanych w smartfonach aparatów o rozdzielczości równej lub większej niż 8 MP. Informacje na temat testowania systemu znajdują się w części Sprawdzanie zmontowanego układu.
- Wyświetlacz: kolorowy wyświetlacz z ekranem: $\geq 4,0$ cala (101 mm)
- Sprzęt: pamięć wewnętrzna ≥ 500 MB
- Oprogramowanie: obsługuje obrazy JPEG i jest zgodne z systemem iOS w wersjach od 11 do 15.
- Elektryczne
 - o Emisje ze smartfona muszą być zgodne z częścią 15 rozdziału 47 Kodeksu przepisów federalnych (albo równoważnymi przepisami).
 - o Układ ładowania indukcyjnego smartfona musi mieć certyfikat Qi (albo równoważny).
 - o Układ ładowania smartfona musi być zgodny z normą IEC/UL 60950-1 (albo równoważną).
 - o Układ ładowania indukcyjnego smartfona musi mieć certyfikat Qi (albo równoważny).
 - o Układ ładowania smartfona musi być zgodny z normą IEC/UL 60950-1 (albo równoważną).

Sprawdzanie zmontowanego układu

Uruchomić aplikację iExaminer i wykonać następujące czynności:

1. Przymocować rękojeść do głowicy. W przypadku korzystania z oftalmoskopu należy włączyć rękojeść i ustawić odczyt dioptrii na 8 (kolor zielony, 8 dioptrii) oraz duży rozmiar plamki światła; nie stosować filtra.
2. Przymocować głowicę do nakładki SmartBracket. Głowicę można zamocować w dowolnej z czterech orientacji.
3. Umieścić kartę do sprawdzania rozdzielczości iExaminer (znajdującą się w pudełku) na płaskiej powierzchni.
4. Na ekranie Exam (Badanie) dotknąć przycisku **Add image** (Dodaj obraz) po prawej lub lewej stronie.



UWAGA Jeśli aplikację zainstalowano w trybie szkoleniowym, dotknąć ikony \oplus , aby rozpocząć badanie.

5. Rozpocznie się nagrywanie. Nagrywanie zostanie zakończone po 30 sekundach. Jeśli ponowne uruchomienie nagrywania jest niezbędne do wykonania wszystkich czynności, dotknąć \odot .
6. Skierować wzornik na pobliską powierzchnię, aby sprawdzić, czy okrąg widoczny na ekranie smartfona jest widoczny w całości.



UWAGA Jeśli okrąg nie jest widoczny w całości, należy sprawdzić poziom powiększenia (powinien wynosić $\times 1,0$) i czy otwór obiektywu głównego jest właściwie wyrównany względem nakładki SmartBracket. W przypadku nieprawidłowego ustawienia należy postępować zgodnie z instrukcjami zdejmowania uchwytu SmartClip zawartymi w dokumencie **PIERWSZE KROKI — ZESTAW IEXAMINER Z NAKŁADKĄ SMARTBRACKET FIRMY WELCH ALLYN.**

- Wyrównać okrąg na karcie do sprawdzania rozdzielczości iExaminer względem krawędzi widocznego obszaru. W razie potrzeby przybliżyć lub oddalić wzornik od karty. Nie zmieniać powiększenia.




UWAGA Jeśli autofokus nie działa, nakierować urządzenie tak, aby cel autofokusu znajdował się na środku ekranu, a następnie dotknąć środka ekranu. Autofokus zostanie zresetowany.




UWAGA Wybrać właściwy okrąg docelowy. Jeden z nich jest przeznaczony dla oftalmoskopu, a drugi dla otoskopu.

- Przejrzeć nagranie i przewinąć do najlepszego obrazu. Użyć gestu szczyknięcia, aby powiększyć zarejestrowany obraz obiektów służących do oceny rozdzielczości.
- Porównać wszystkie 5 obiektów, aby sprawdzić, czy na obrazach widoczne są trzy linie. Jeśli nie, należy powtórzyć test.


Wynik pozytywny
(3 widoczne linie)

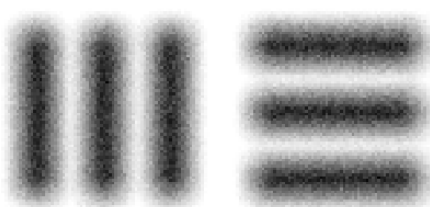

Wynik pozytywny
(3 widoczne linie)

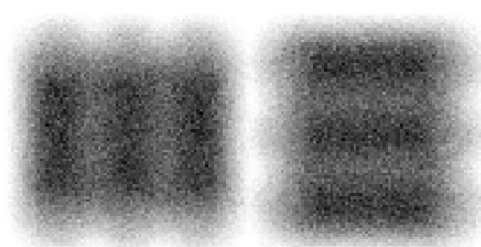

Wynik
negatywny*

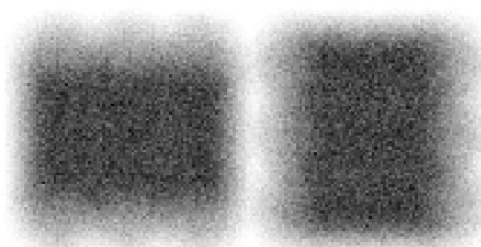

- Jeśli dla wszystkich pięciu obiektów wynik testu jest pozytywny, konfiguracja urządzenia jest zakończona. Zmienić ustawienie dioptrii w oftalmoskopie z powrotem na 0 dioptrii.
- Rozpocząć badanie pacjenta. Więcej informacji zawiera instrukcja wykonywania badania (znajdująca się w pudełku) lub instrukcja obsługi (dostępna w aplikacji i za pośrednictwem witryny hillrom.com/getstarted).

* Skontaktować się z działem pomocy technicznej Hillrom albo przejść do witryny hillrom.com, aby uzyskać pomoc.

Korzystanie z funkcji aplikacji



Przejsć do wybranej czynności za pomocą poniższych odnośników lub przeczytać pełną instrukcję obsługi systemu operacyjnego danego urządzenia.

Tryb szkoleniowy	Tryb kliniczny
Modyfikowanie ustawień (iOS)	Modyfikowanie ustawień (iOS)
Ustawianie hasła (iOS)	Opcja niedostępna
Resetowanie hasła (iOS)	Opcja niedostępna
Logowanie (iOS)	Opcja niedostępna
Wyświetlanie badania, którego ważność wygasła (iOS)	Opcja niedostępna
Usuwanie badań, których ważność wygasła (iOS)	Opcja niedostępna
Wyświetlanie badań, których ważność wkrótce wygaśnie (iOS)	Opcja niedostępna
Dodawanie badania (iOS)	Rozpoczynanie nowego badania (iOS)
Rejestracja obrazów (iOS)	Rejestracja obrazów (iOS)
Wybór obrazów (iOS)	Wybór obrazów (iOS)
Wyświetlanie wybranego obrazu (iOS)	Wyświetlanie wybranego obrazu (iOS)
Stosowanie filtra, przenoszenie i usuwanie obrazów (iOS)	Stosowanie filtra, przenoszenie i usuwanie obrazów (iOS)
Udostępnianie obrazu (iOS)	Udostępnianie obrazu (iOS)
Zapisywanie badania (iOS)	Opcja niedostępna
Aktualizacja zapisanego badania (iOS)	Opcja niedostępna
Udostępnianie badania (iOS)	Udostępnianie badania (iOS)
Usuwanie badania (iOS)	Odrzucanie badania (iOS)

Aby uzyskać informacje na temat obsługi aplikacji, przejść do części [Instrukcja dla systemu iOS](#).

Instrukcja dla systemu iOS



UWAGA Przedstawione obrazy mają charakter przykładowy.




UWAGA W trybie klinicznym zostanie otwarty ekran Exam (Badanie).

Elementy dostępne na ekranie (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego i trybu klinicznego

Ikona

Definicja

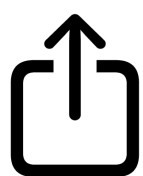


Wyślij/
udostępnij




Usuń



Filtr

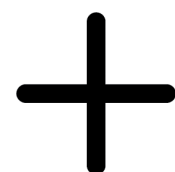

Dodaj

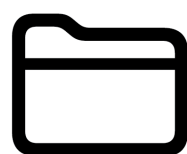

Przenieś


Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Modyfikowanie ustawień (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego i trybu klinicznego

Modyfikacja ustawień takich jak okres przechowywania danych. Niektóre ustawienia mogą być dostępne tylko w określonym trybie.

1. Przejść do ustawień urządzenia.
2. Przewinąć do aplikacji iExaminer Pro.
3. Otworzyć ustawienia aplikacji.

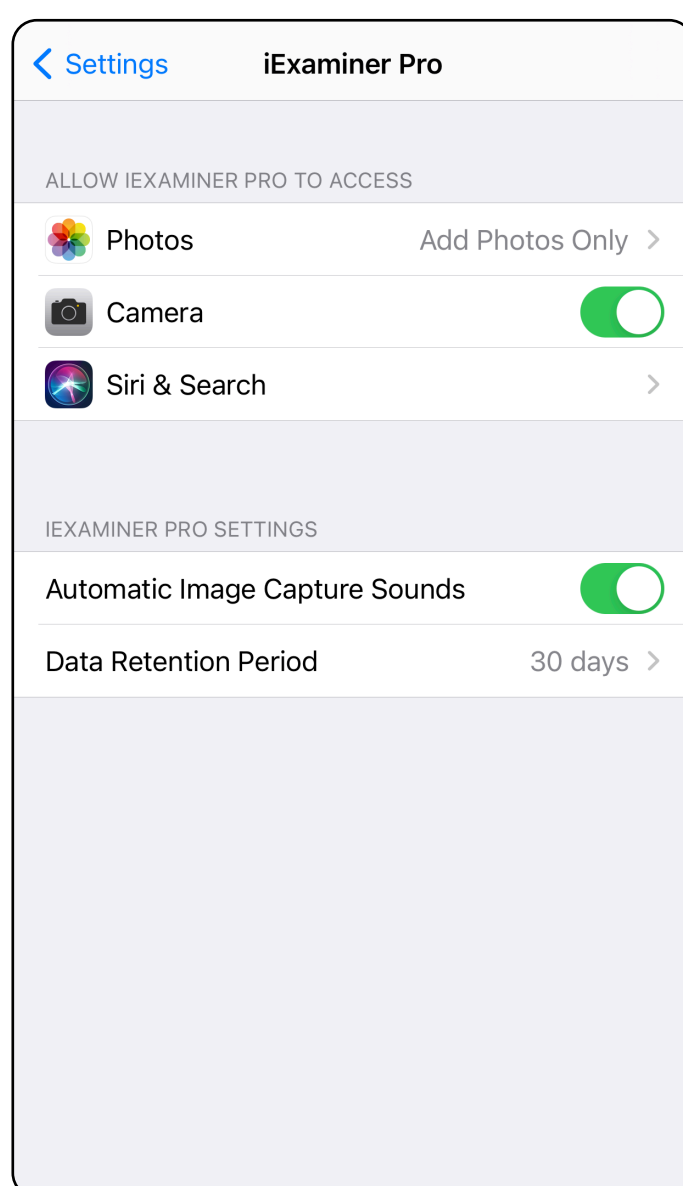

4. Zmodyfikować opcje ustawień.
5. Aby zapisać ustawienia, dotknąć strzałki „wstecz” w lewym górnym rogu.
6. Powrócić do aplikacji.

Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Uwierzytelnianie (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego

Z poziomego ekranu uwierzytelniania można wykonać poniższe czynności.


- [Ustawianie hasła \(iOS\)](#)
- [Resetowanie hasła \(iOS\)](#)
- [Logowanie \(iOS\)](#)

Ustawianie hasła (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego

Tworzenie hasła spełniającego kryteria weryfikacji.

1. Na ekranie uwierzytelniania wprowadzić nowe hasło dwukrotnie.
2. Dotknąć **Set** (Utwórz).

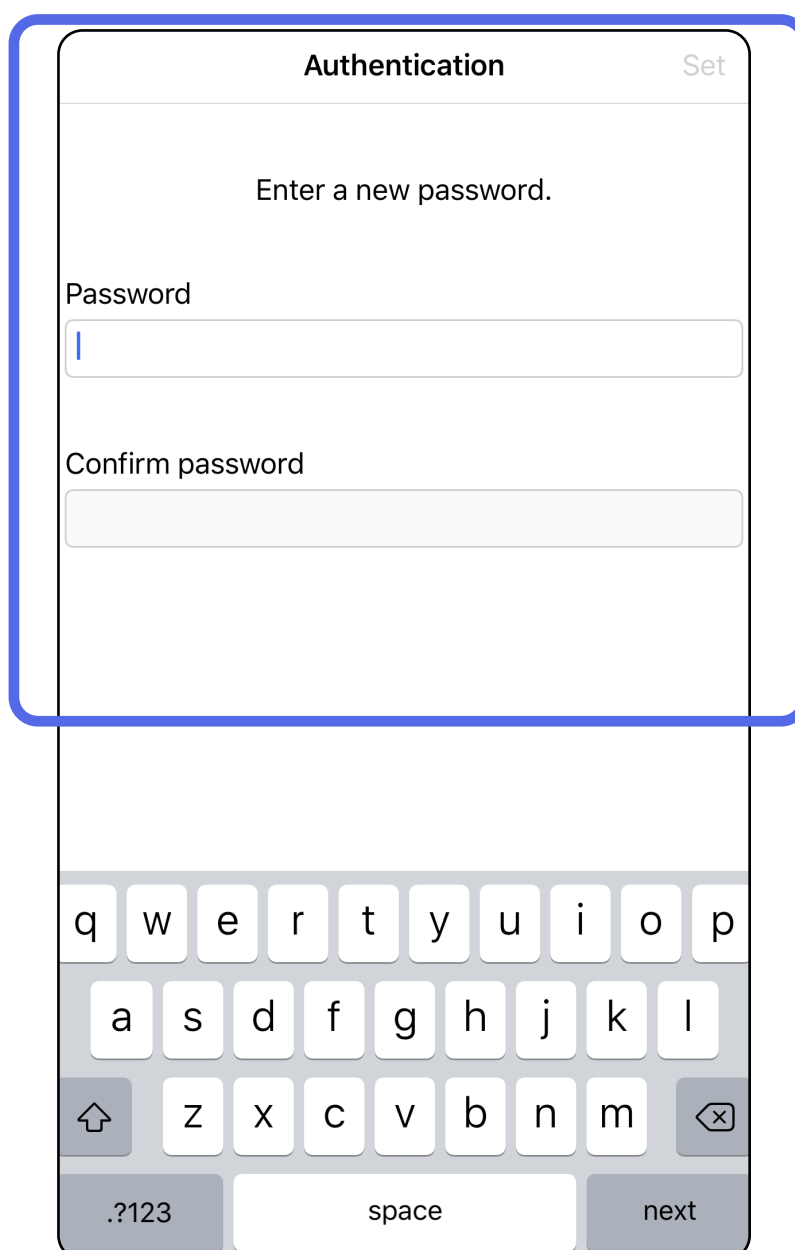

Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*


Resetowanie hasła (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego

1. Aby zresetować hasło na ekranie uwierzytelniania, dotknąć **Reset** (Resetuj).
2. Wprowadzić nowe hasło dwukrotnie.
3. Dotknąć **Reset** (Resetuj), aby potwierdzić zresetowanie hasła. Działania tego nie można cofnąć.



UWAGA Zresetowanie hasła spowoduje usunięcie z aplikacji wszystkich badań.

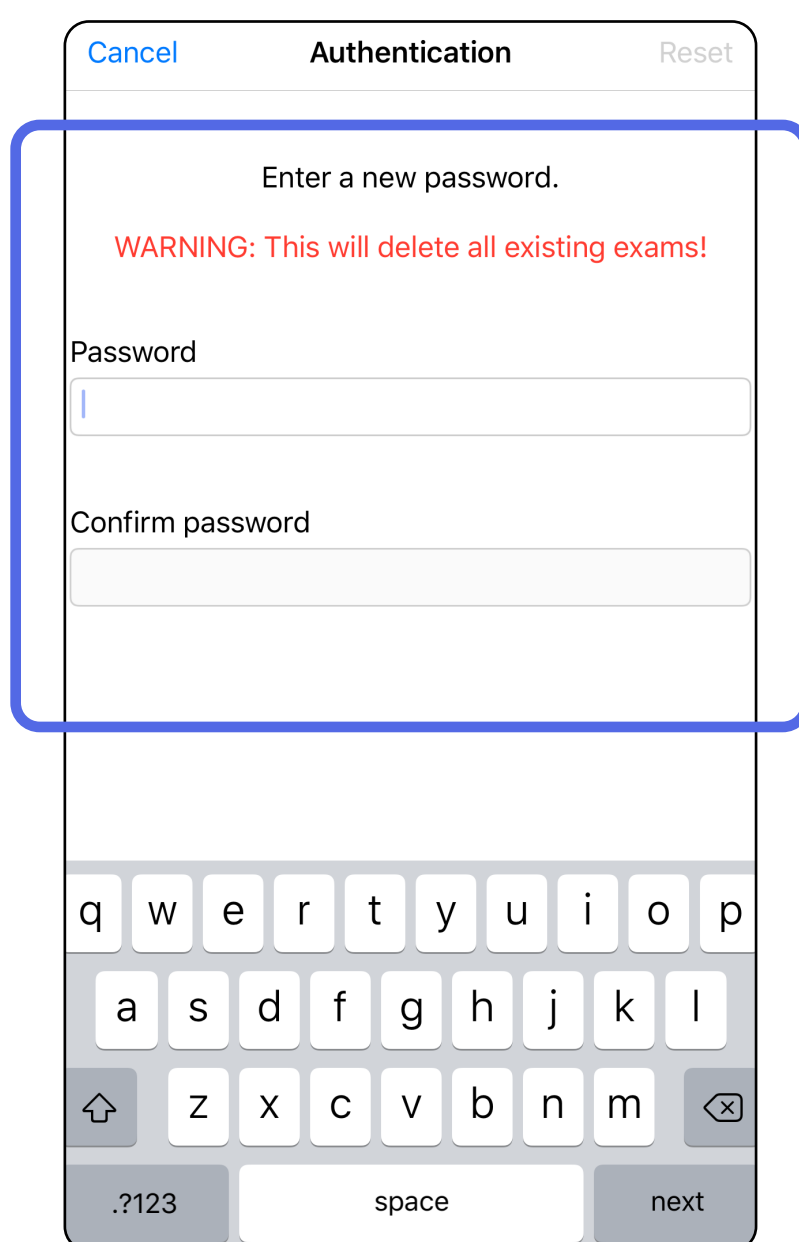


Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Logowanie (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego

1. Otworzyć aplikację.
2. Wprowadzić hasło na ekranie uwierzytelniania.
3. Dotknąć **Login** (Zaloguj się).

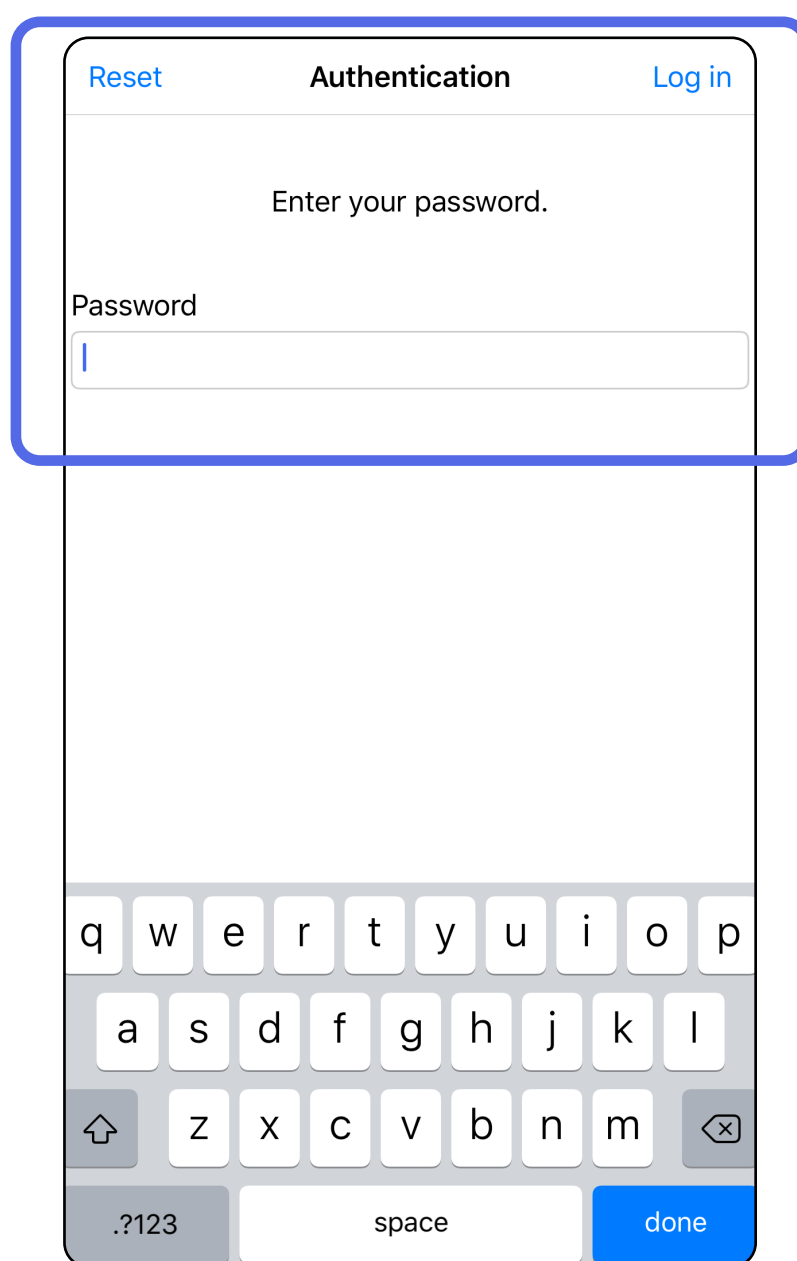


Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Badania, których ważność wygasła (iOS)


Dotyczy: trybu szkoleniowego

Ważność badania wygasa wraz z upływem okresu przechowywania danych dla tego badania. Jeśli aplikacja zostanie otwarta w trybie szkoleniowym, a ważność niektórych badań wygasła, należy je usunąć, aby można było kontynuować korzystanie z aplikacji. Jeśli istnieją badania, których ważność wygasła, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

1. Dotknąć **OK**, aby potwierdzić komunikat ostrzegawczy.

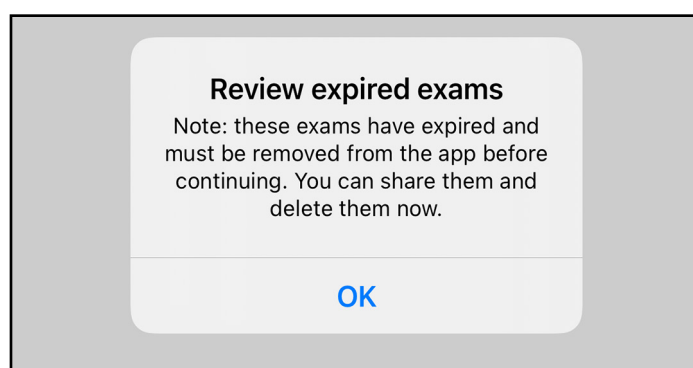

2. Przejrzeć wyświetlaną listę badań, których ważność wygasła.

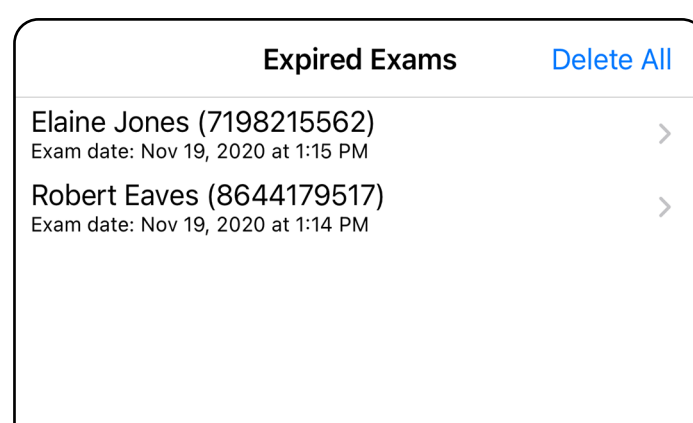


3. [Wyświetlanie badania, którego ważność wygasła \(iOS\)](#) — dzięki tej opcji można udostępnić lub usunąć badanie oraz udostępnić obrazy przypisane do danego badania lub skorzystać z opcji [Usuwanie badań, których ważność wygasła \(iOS\)](#).


Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Wyświetlanie badania, którego ważność wygasła (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego

Dotknąć znajdującego się na liście wpisu badania, którego ważność wygasła. Badanie, którego ważność wygasła, jest przeznaczone tylko do odczytu i musi zostać usunięte przed rozpoczęciem kolejnego badania. Przed usunięciem badania, którego ważność wygasła, można wykonać podane poniżej czynności.

- Dotknąć obrazu, aby uruchomić opcję [Wyświetlanie obrazu w badaniu, którego ważność wygasła \(iOS\)](#).
- Dotknąć ikony , aby wybrać opcję [Udostępnianie badania \(iOS\)](#).

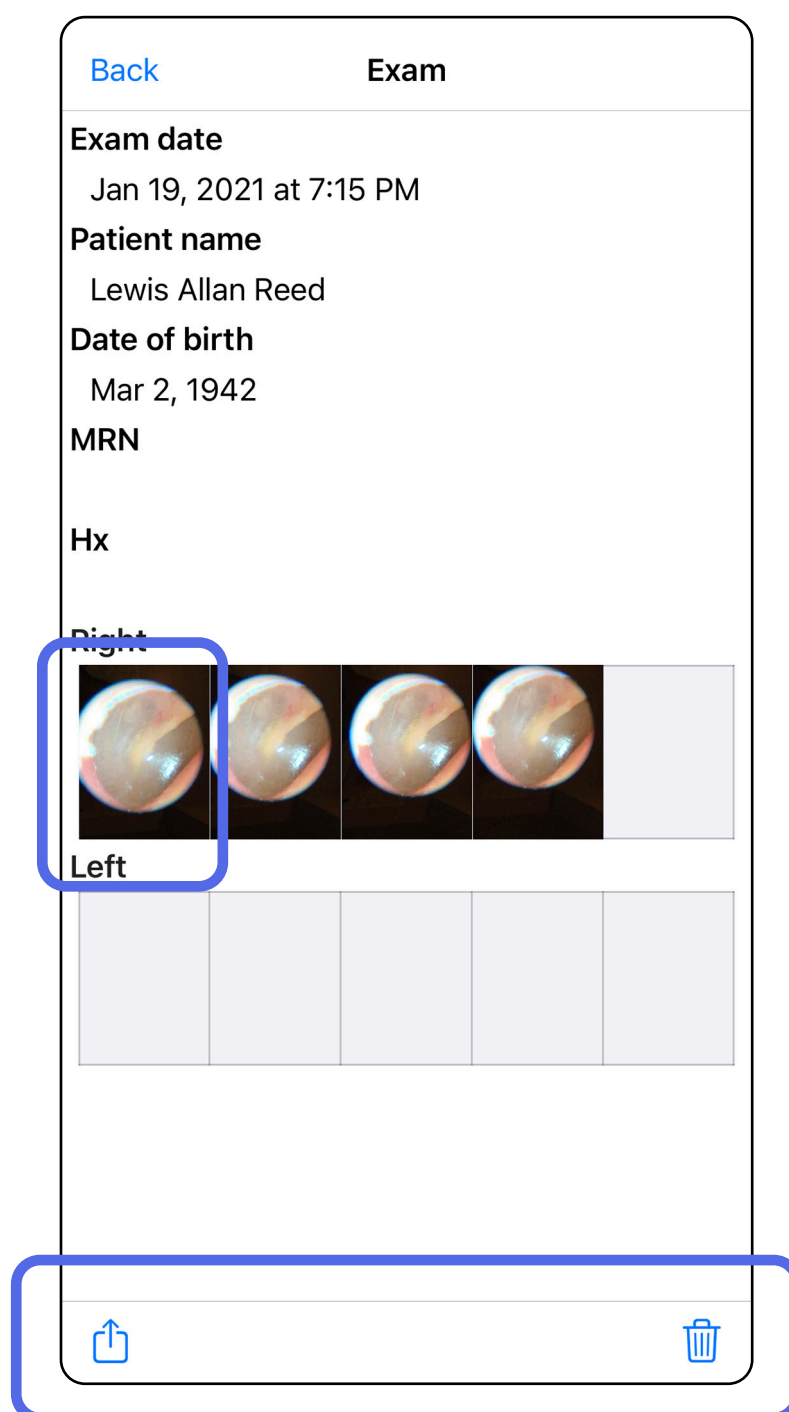



- [Usuwanie badań, których ważność wygasła \(iOS\)](#).

Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Wyświetlanie obrazu w badaniu, którego ważność wygasła (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego

Na ekranie Expired Exam (Badanie, którego ważność wygasła), którego ważność wygasła, dotknąć obrazu, aby go otworzyć.

- Dotknąć ikony , aby uruchomić opcję [Udostępnianie obrazu \(iOS\)](#) w badaniu, którego ważność wygasła.
- Dotknąć ikony , aby użyć opcji [Stosowanie filtra \(iOS\)](#) w badaniu, którego ważność wygasła.



Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*


Usuwanie badań, których ważność wygasła (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego

Aby usunąć wszystkie badania, których ważność wygasła, należy wykonać poniższe czynności.

Dotknąć **Delete All** (Usuń wszystko).


1. Dotknąć **OK**, aby potwierdzić usunięcie badań, których ważność wygasła.

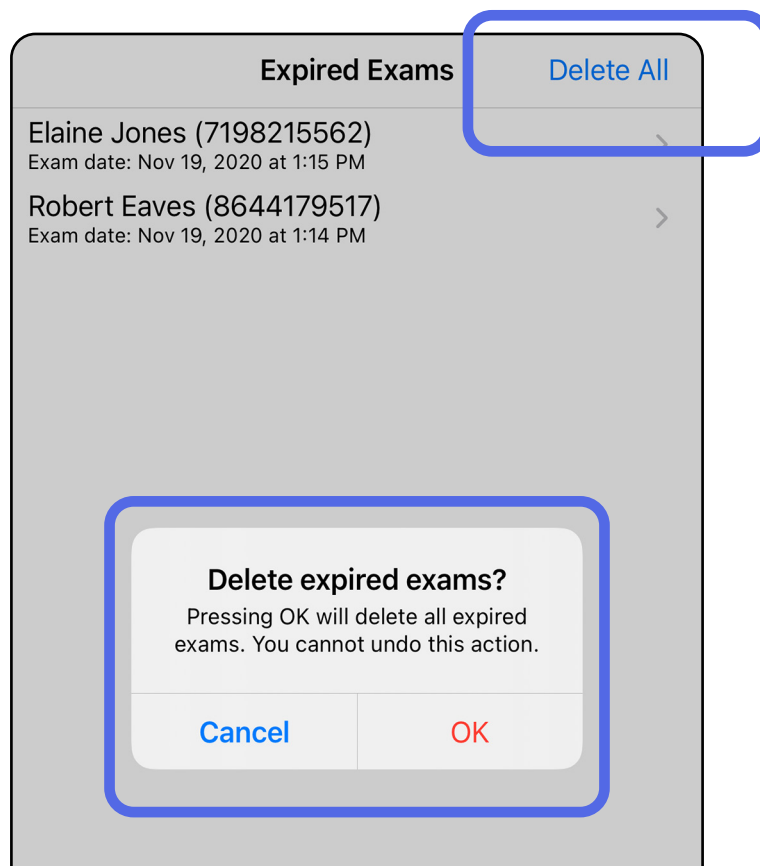


Istnieją dwie opcje usuwania badania, którego ważność wygasła.


Opcja 1: usunięcie przeciągnięciem


1. Przesunąć palcem w lewo po nazwie badania, którego ważność wygasła.
2. Dotknąć **Delete** (Usuń), aby potwierdzić.

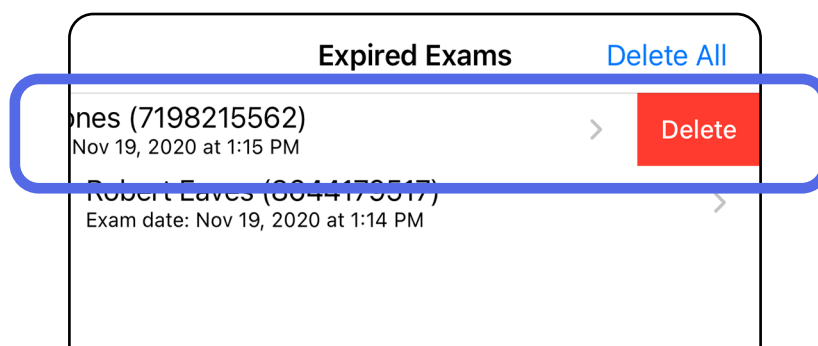

3. W oknie podręcznym dotknąć **OK**, aby potwierdzić.

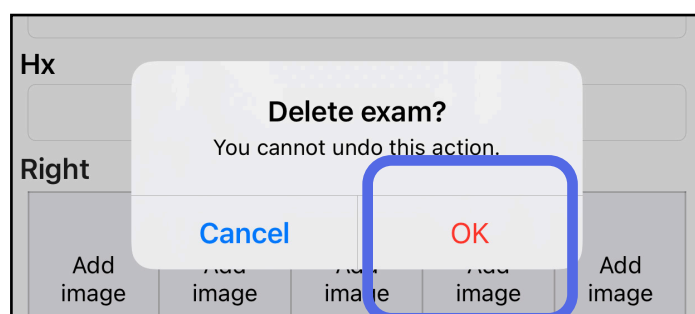

Opcja 2: wyświetlenie badania, którego ważność wygasła, a następnie dotknięcie ikony .

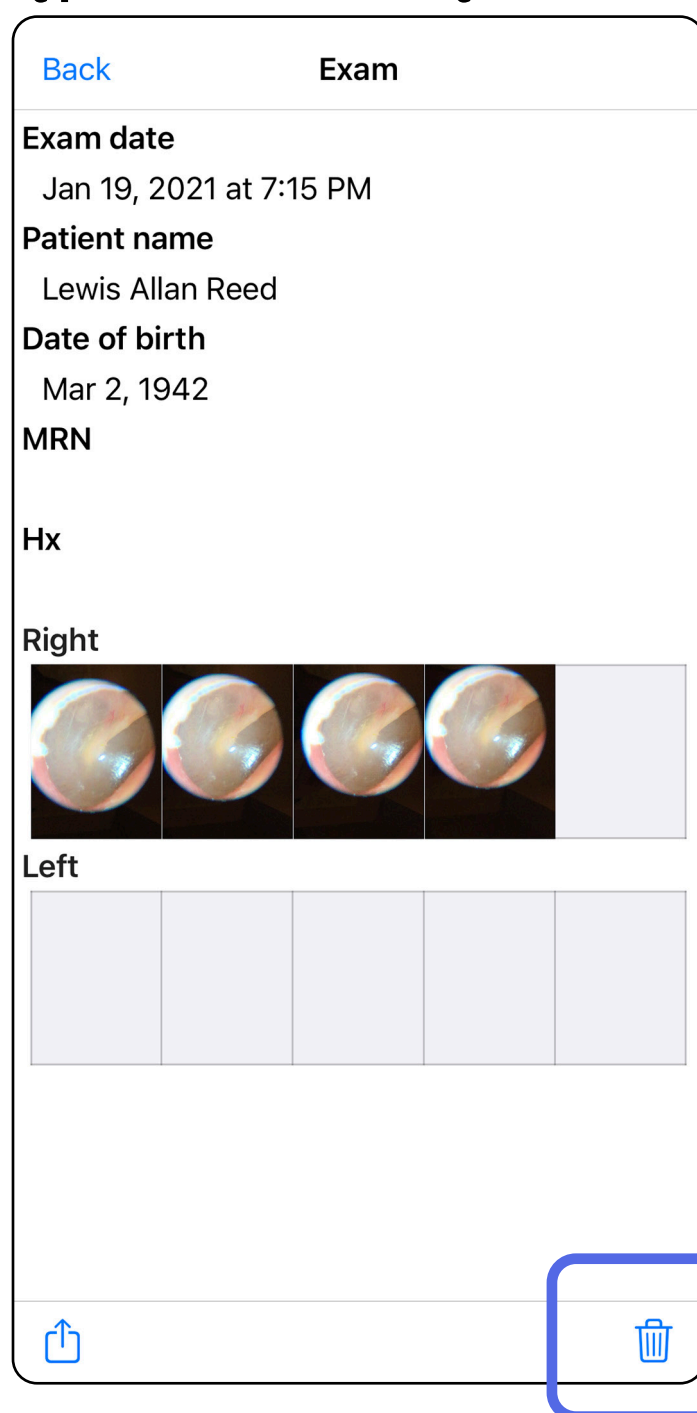


Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Badania, których ważność wkrótce wygaśnie (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego

Jeśli ważność niektórych badań wkrótce wygasa, pojawi się okno dialogowe „Wkrótce wygaśnie ważność badań”.


Dotknąć **OK**, aby przejrzeć badania, których ważność wygasa.

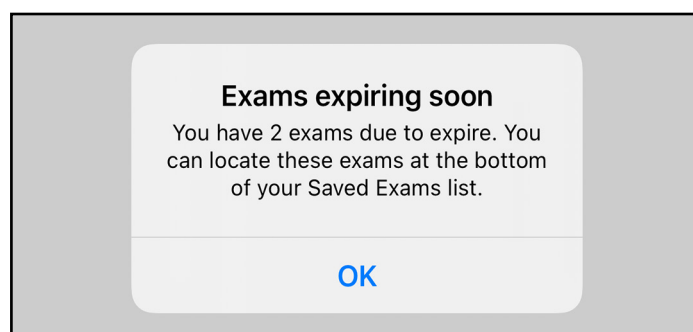

Wyświetlanie badań, których ważność wkrótce wygaśnie (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego

Dopóki ważność badania nie wygaśnie, nie jest wymagane żadne działanie.

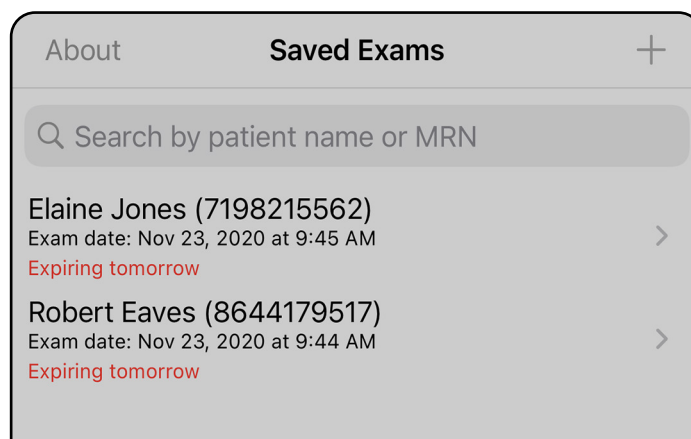


Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Dodawanie badania (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego

1. Dotknąć ikony **+**, aby dodać nowe badanie.
2. Patrz [Rejestracja obrazów \(iOS\)](#).

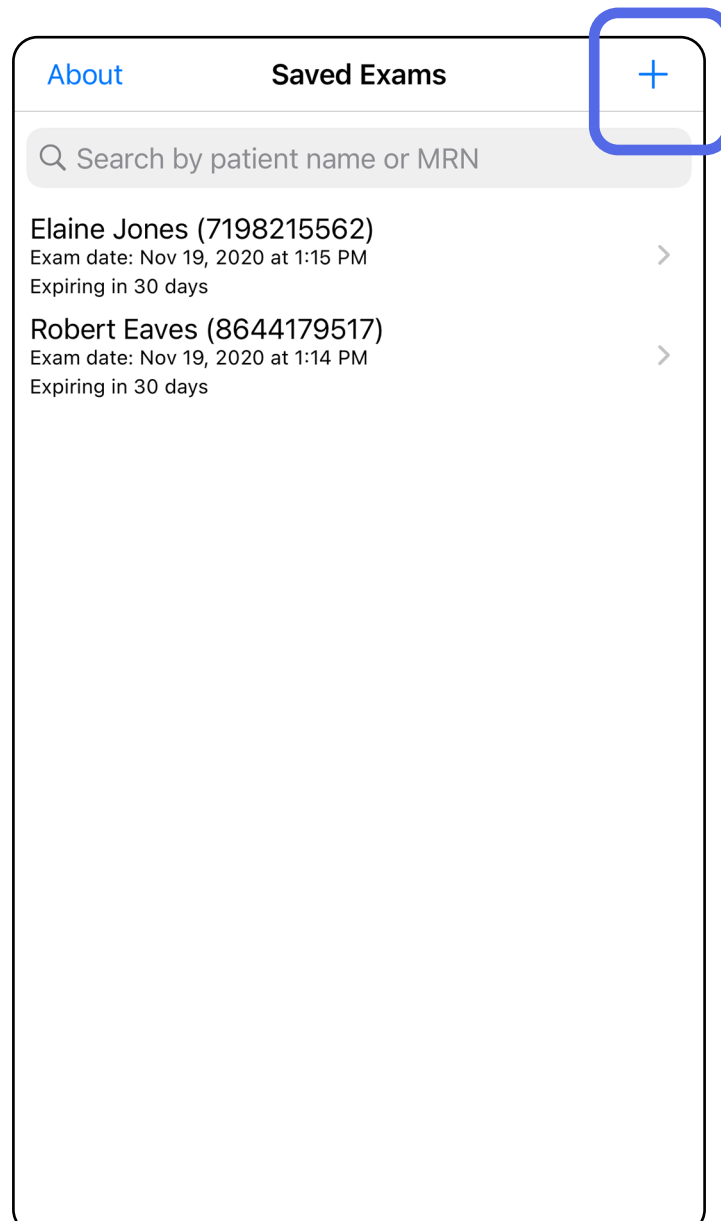

Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Rejestracja obrazów (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego i trybu klinicznego

1. Umieścić urządzenie na wprost badanej strony. Materiały wideo i inne materiały szkoleniowe dotyczące przeprowadzania badania można znaleźć na stronie hillrom.com/getstarted.
2. Dotknąć **Add image** (Dodaj obraz), aby zarejestrować obrazy dla lewej lub prawej strony.

Exam

Exam date
Mar 24, 2020 at 9:59 AM

Patient name
Required

Date of birth

MRN
Required

Hx

Right

Add image Add image Add image Add image Add image


Left

Add image Add image Add image Add image Add image


↑

Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

3. Jeśli jest dostępny wcześniejszy zapis, z menu podręcznego wybrać opcję **New recording** (Nowy zapis) albo wybrać zarejestrowane już obrazy, korzystając z opcji **Previous recording** (Poprzedni zapis). Patrz [Wybór obrazów \(iOS\)](#).

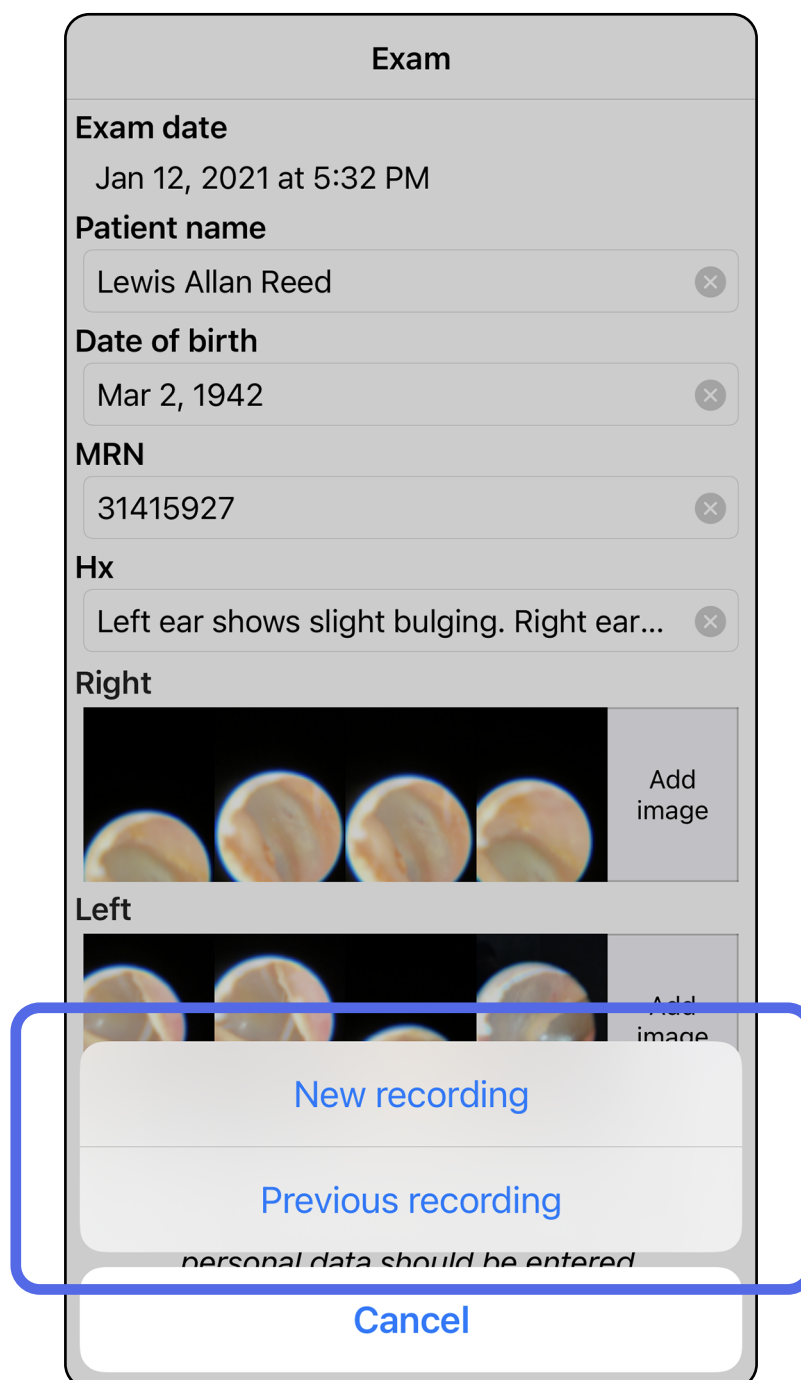

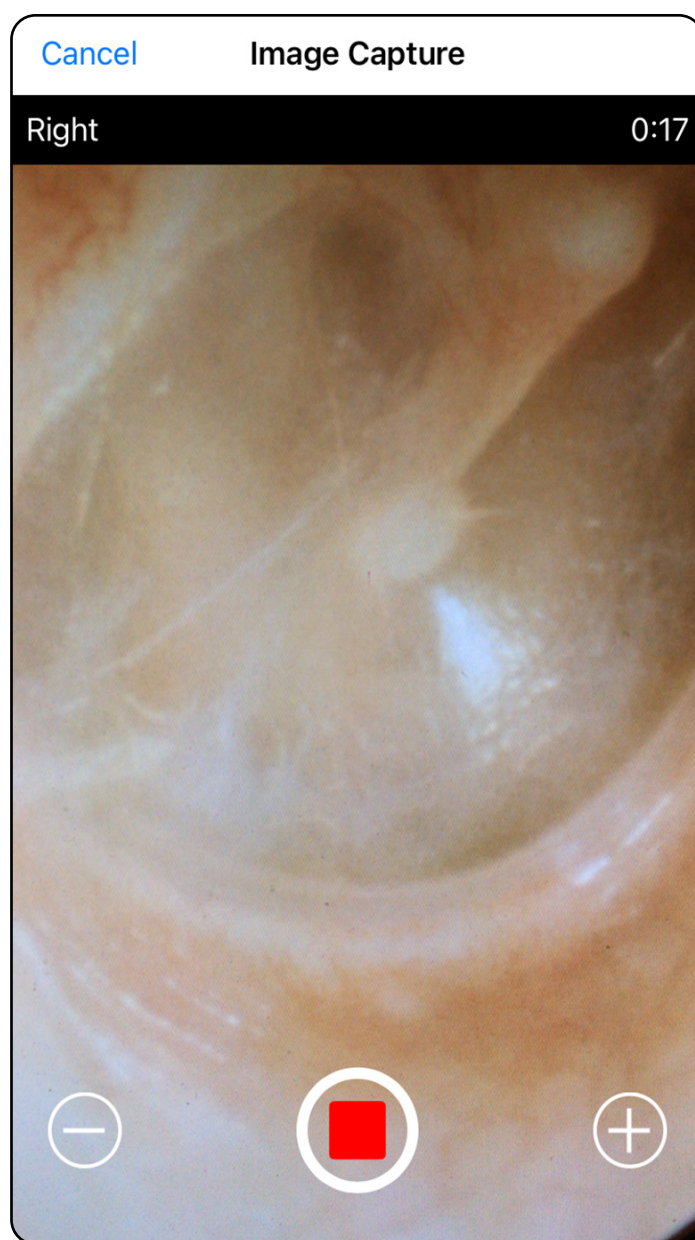


Jeśli brak jest wcześniejszych zapisów, zapis rozpocznie się i zatrzyma automatycznie. Patrz [Wybór obrazów \(iOS\)](#).



Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Wybór obrazów (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego i trybu klinicznego

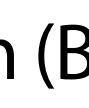
1. Wybrać obrazy, które mają być zapisane, korzystając z suwaka na dole i przesuwając go w prawo lub w lewo.
2. Dotknąć ikony , aby zastosować filtr. Filtry są stosowane do wszystkich obrazów aktualnie zarejestrowanych na ekranie wyboru obrazów.
3. Dotknąć ikony  w przypadku każdego obrazu, który ma być zapisany.
4. Dotknąć opcji **Done** (Gotowe), aby powrócić do ekranu Exam (Badanie), lub ikony , aby udostępnić wybrany obraz z aktualnego ekranu.



UWAGA W ramach jednego badania można zapisać maksymalnie pięć obrazów zarejestrowanych dla każdej ze stron.



UWAGA Strzałka w prawym górnym rogu obrazu wskazuje górę zarejestrowanego obrazu.

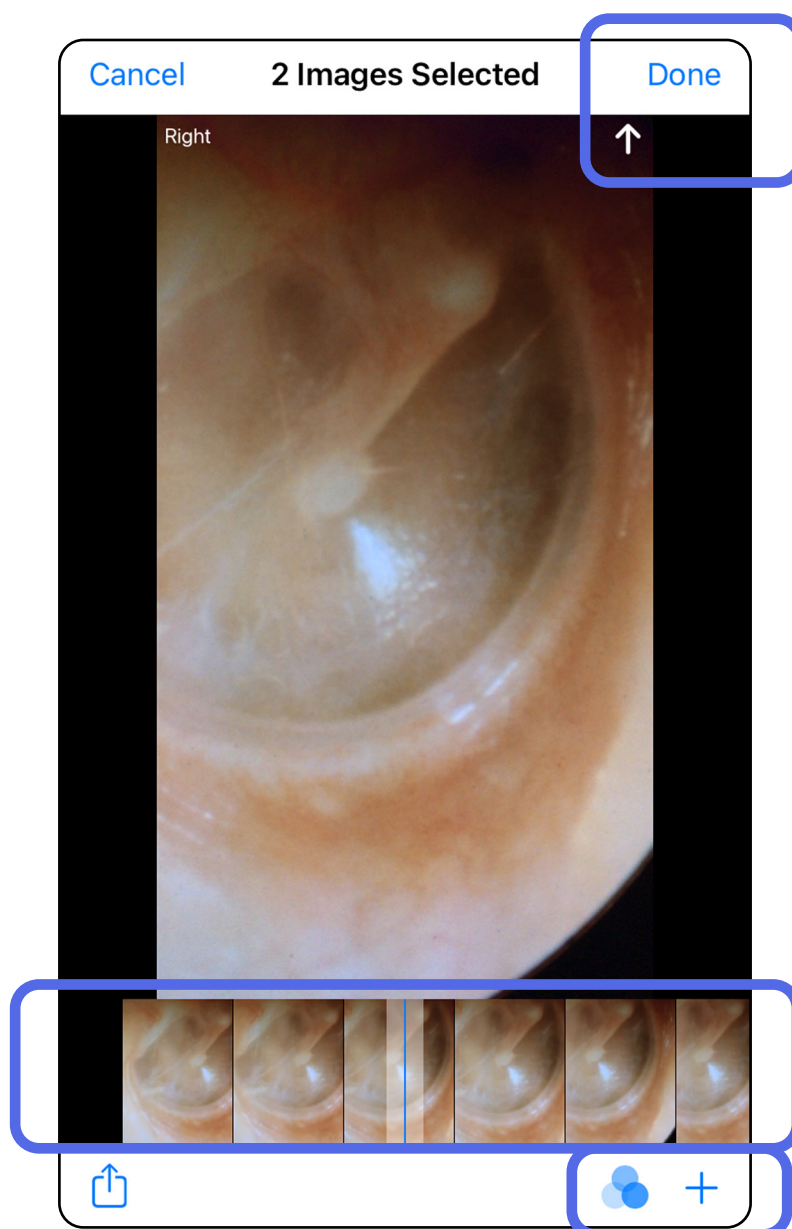

Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*


Wyświetlanie wybranego obrazu (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego i trybu klinicznego

1. Dotknąć obrazu na ekranie Exam (Badanie).
2. Na ekranie Selected image (Wybrany obraz) obraz przewijać w prawo albo w lewo, przechodząc między wszystkimi obrazami zarejestrowanymi po obu stronach.



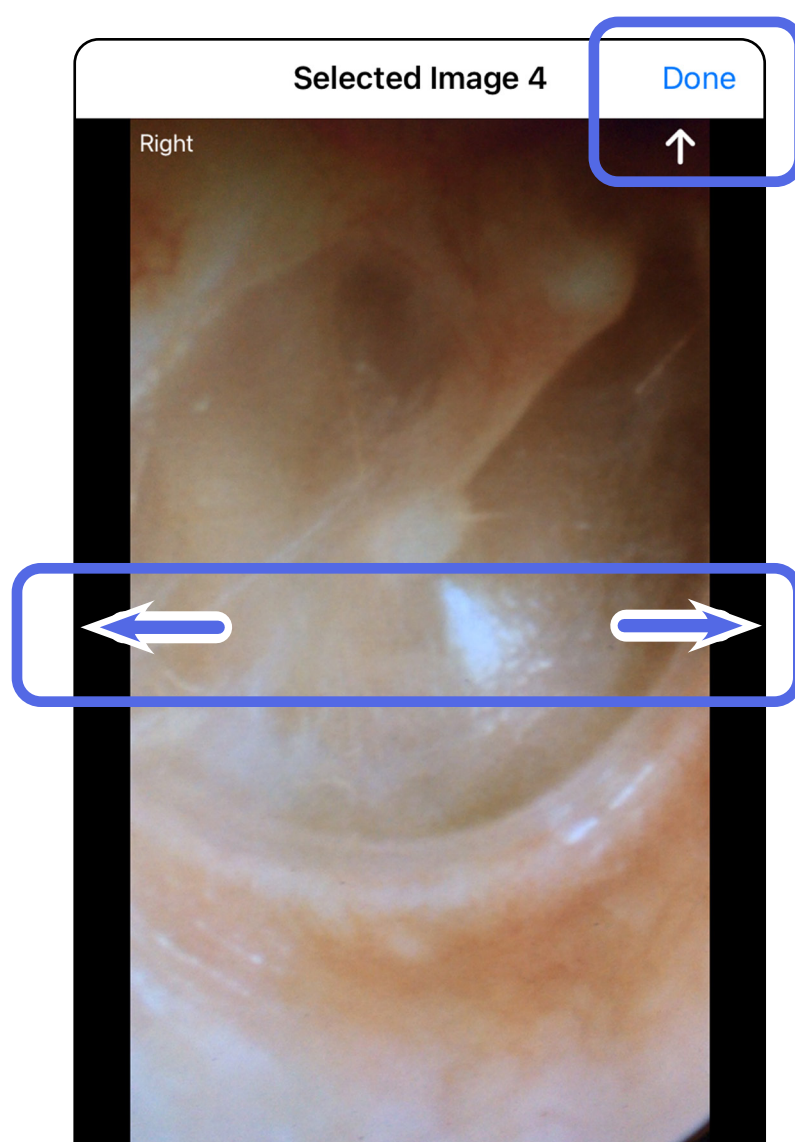


UWAGA Strzałka w prawym górnym rogu obrazu wskazuje górę zarejestrowanego obrazu.




Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Stosowanie filtra, przenoszenie i usuwanie obrazów (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego i trybu klinicznego
Na ekranie Badanie dotknąć obrazu, aby go otworzyć.

- Dotknąć ikony , aby zastosować filtr. Filtry zostaną zastosowane tylko wobec bieżącego obrazu i po jego udostępnieniu. Przechowywane są oryginalne obrazy bez filtra.
- Dotknąć ikony , aby przypisać obraz do przeciwległej strony (*opcja niedostępna w przypadku badań, które utraciły ważność*). Ta funkcja jest przydatna, jeśli podczas uruchamiania rejestracji obrazu wybrano nieprawidłową stronę.
- Dotknąć ikony , aby usunąć obraz, a następnie potwierdzić usunięcie (*opcja niedostępna w przypadku badań, które utraciły ważność*).

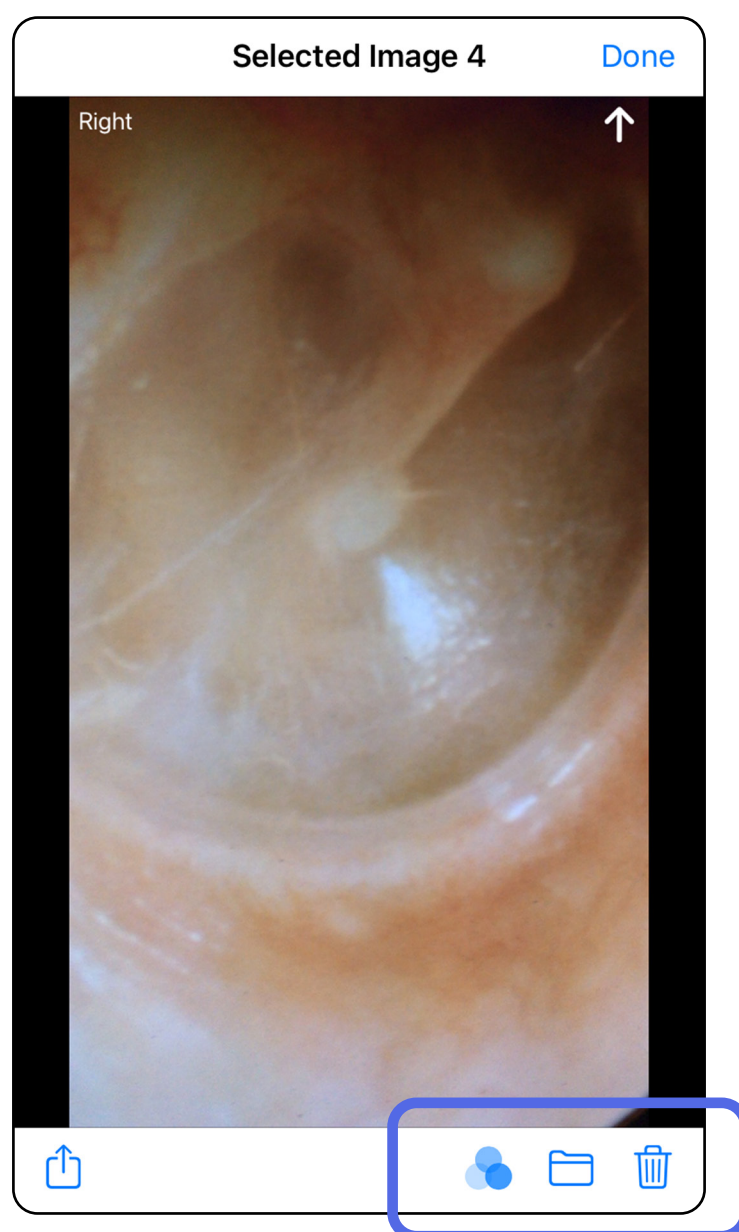

Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Zapisywanie badania (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego

1. Dodać dane pacjenta.
2. Dotknąć **Save** (Zapisz).



UWAGA Do zapisania badania nie są wymagane obrazy. Dane pacjenta można dodać przed wybraniem obrazów albo po ich wybraniu.



UWAGA Badanie można zapisać tylko po wprowadzeniu wymaganych danych pacjenta.

Cancel Exam Save

Exam date
Jan 1, 2021 at 10:19 AM

Patient name
Declan McManus

Date of birth
Aug 25, 1954

MRN

Hx

Right

Left

Add image Add image Add image

Add image Add image Add image Add image Add image


Share icon

Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Aktualizacja zapisanego badania (iOS)



Dotyczy: trybu szkoleniowego

1. Aby edytować badanie, dotknąć nazwy danego badania, aby je otworzyć.

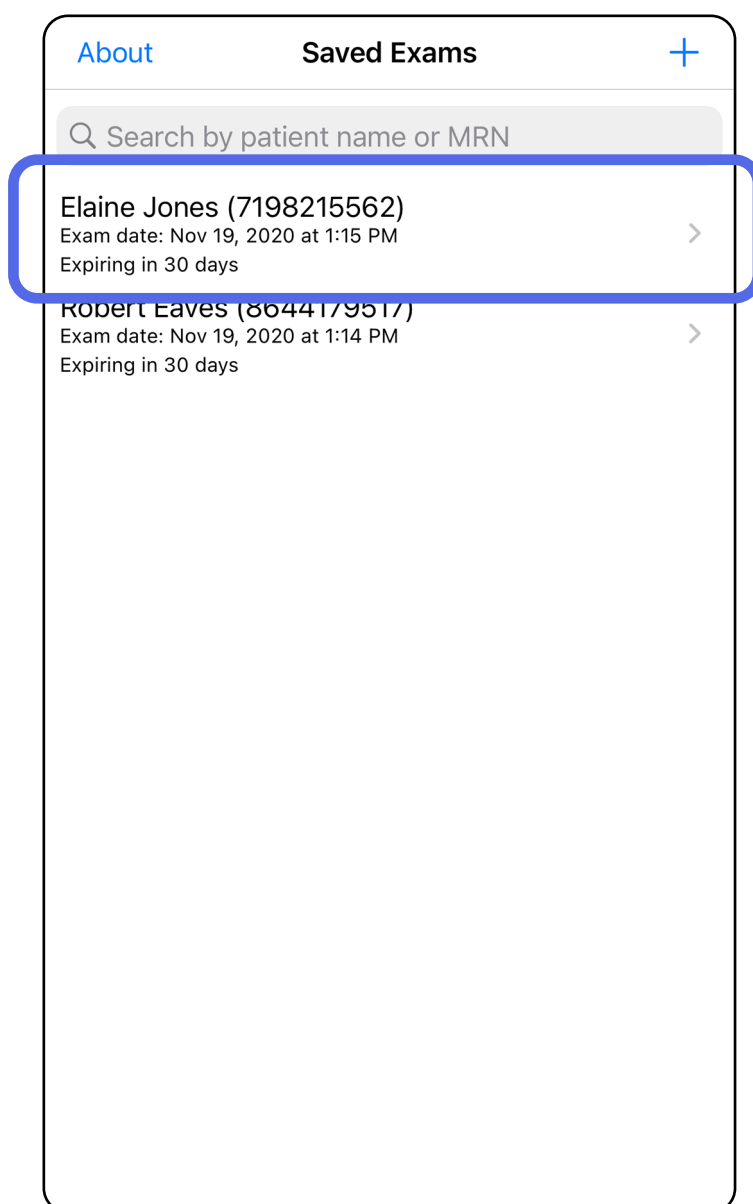

Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

2. Na ekranie Exam (Badanie) dotknąć pola, którego treść ma być zmieniona.
3. Wprowadzić informacje dotyczące pacjenta.
 - a. Użyć podręcznej klawiatury ekranowej albo numerycznej, aby wprowadzić imię i nazwisko pacjenta lub numer dokumentacji medycznej (MRN).
 - b. W okienku podręcznym kalendarza wybrać datę urodzenia.

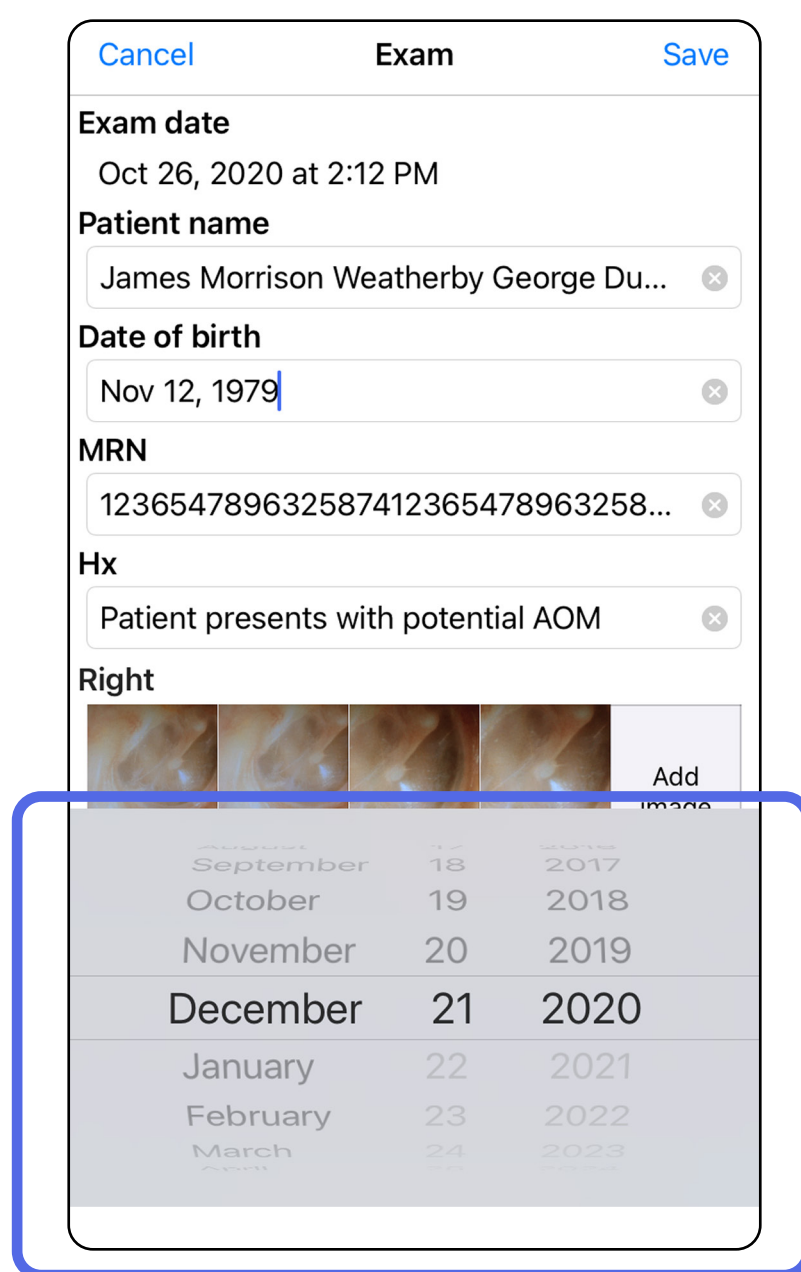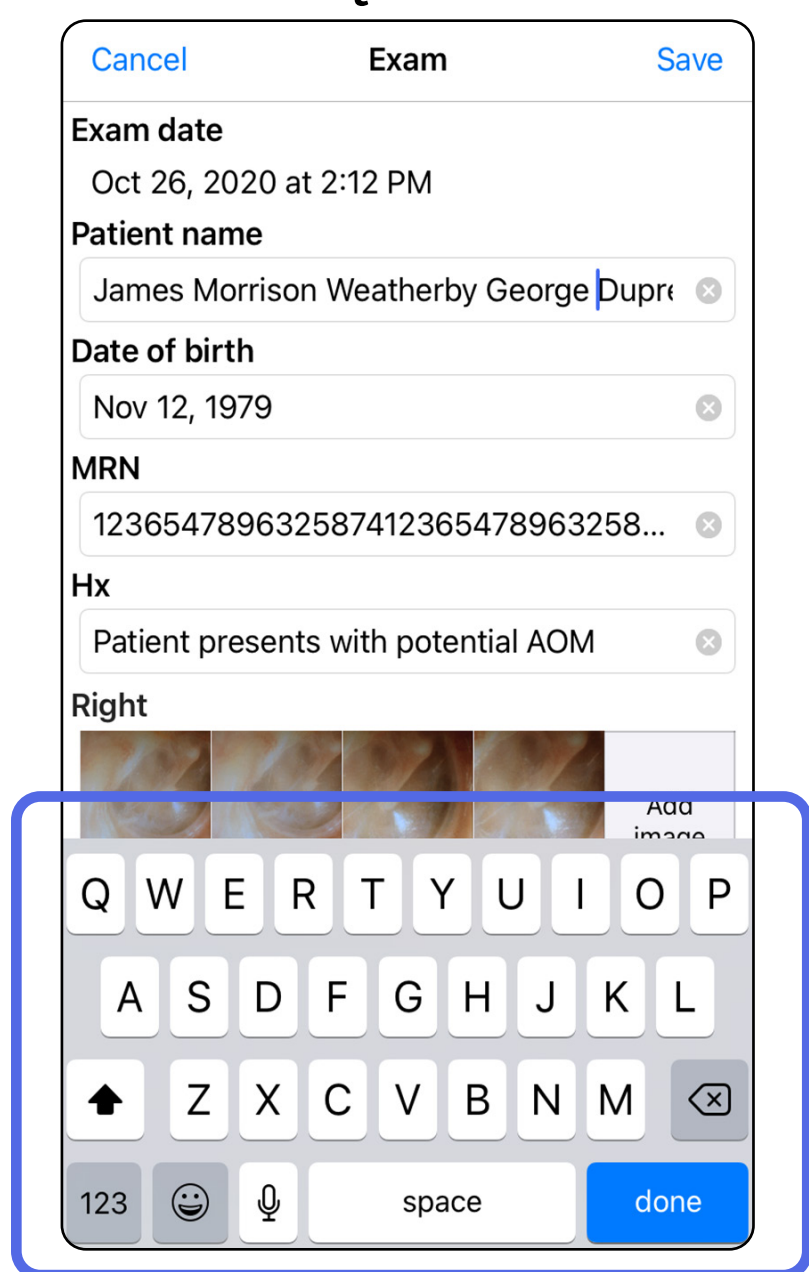

4. Dodać albo usunąć obrazy. Patrz [Rejestracja obrazów \(iOS\)](#) i [Stosowanie filtra, przenoszenie i usuwanie obrazów \(iOS\)](#).
5. Dotknąć **Save** (Zapisz).




UWAGA Opcja zapisywania jest dostępna tylko wówczas, gdy wprowadzono zmiany, a wymagane dane pacjenta są kompletne.

Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*


Udostępnianie badania (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego i trybu klinicznego

1. Na ekranie Exam (Badanie) dotknąć ikony .
2. Aby udostępnić badanie, postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami.



UWAGA Opcja udostępniania jest dostępna tylko wówczas, gdy w ramach danego badania dostępny jest przynajmniej jeden obraz i wymagane dane pacjenta.

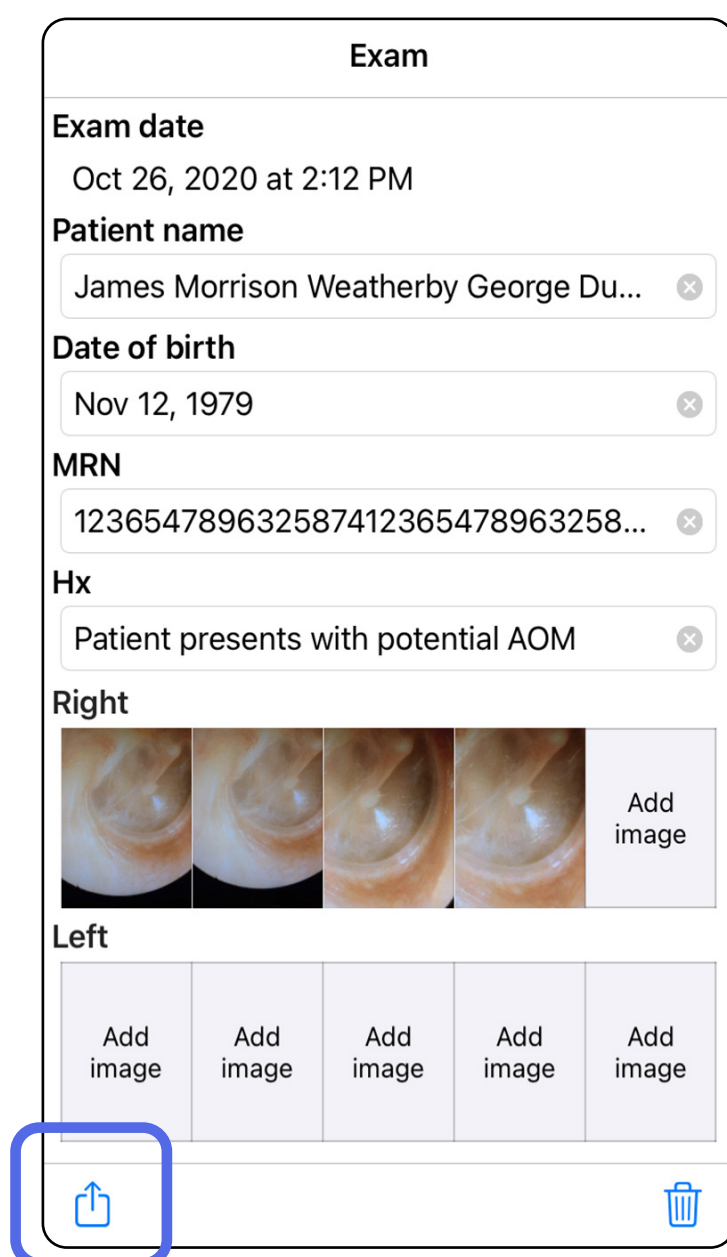

Exam


Exam date
Oct 26, 2020 at 2:12 PM


Patient name
James Morrison Weatherby George Du... x



Date of birth
Nov 12, 1979 x

MRN
123654789632587412365478963258... x

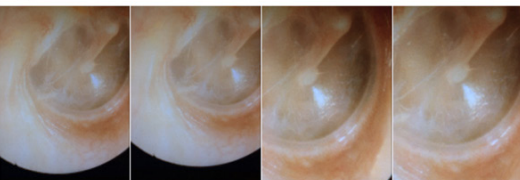Hx
Patient presents with potential AOM x


Right
 Add image

Left


Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

3. Wybrać metodę udostępniania z menu podręcznego.

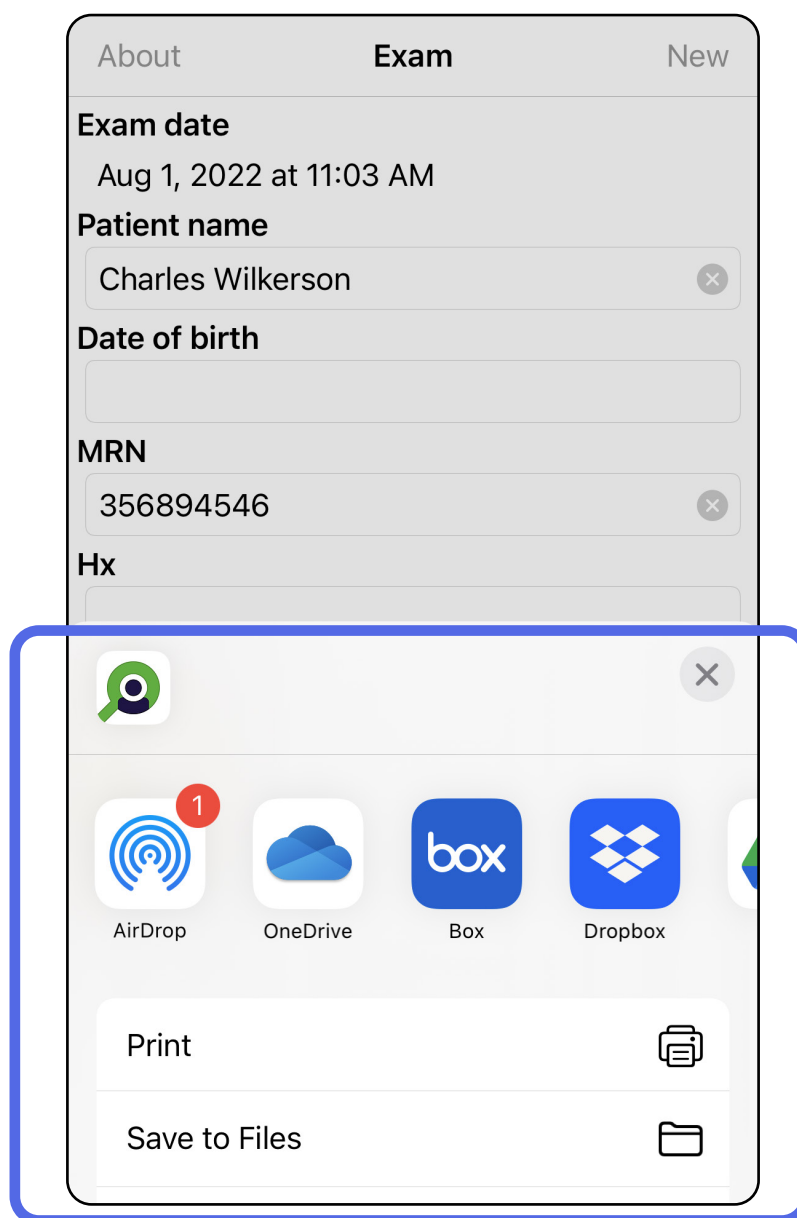

4. Aby udostępnić, należy postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami.



UWAGA Patrz [Urządzenie i dane pacjentów a bezpieczeństwo](#).




UWAGA Udostępniane obrazy z aplikacji iExaminer mogą zawierać wbudowane dane. Niektóre aplikacje do przeglądania zdjęć nie obsługują wbudowanych danych. Jeśli odbiorca nie może wyświetlić zdjęcia, wówczas powinien sprawdzić, czy aplikacja do przeglądania zdjęć obsługuje wyświetlanie obrazów z wbudowanymi danymi albo skorzystać z innej aplikacji do przeglądania zdjęć.

Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Udostępnianie obrazu (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego i trybu klinicznego

1. Dotknąć żądanego obrazu na ekranie Exam (Badanie).
2. Dotknąć ikony .




UWAGA Opcja udostępniania jest dostępna tylko wówczas, gdy w ramach danego badania dostępne są wymagane dane pacjenta.



Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

3. Wybrać metodę udostępniania z menu podręcznego i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami, aby udostępnić.

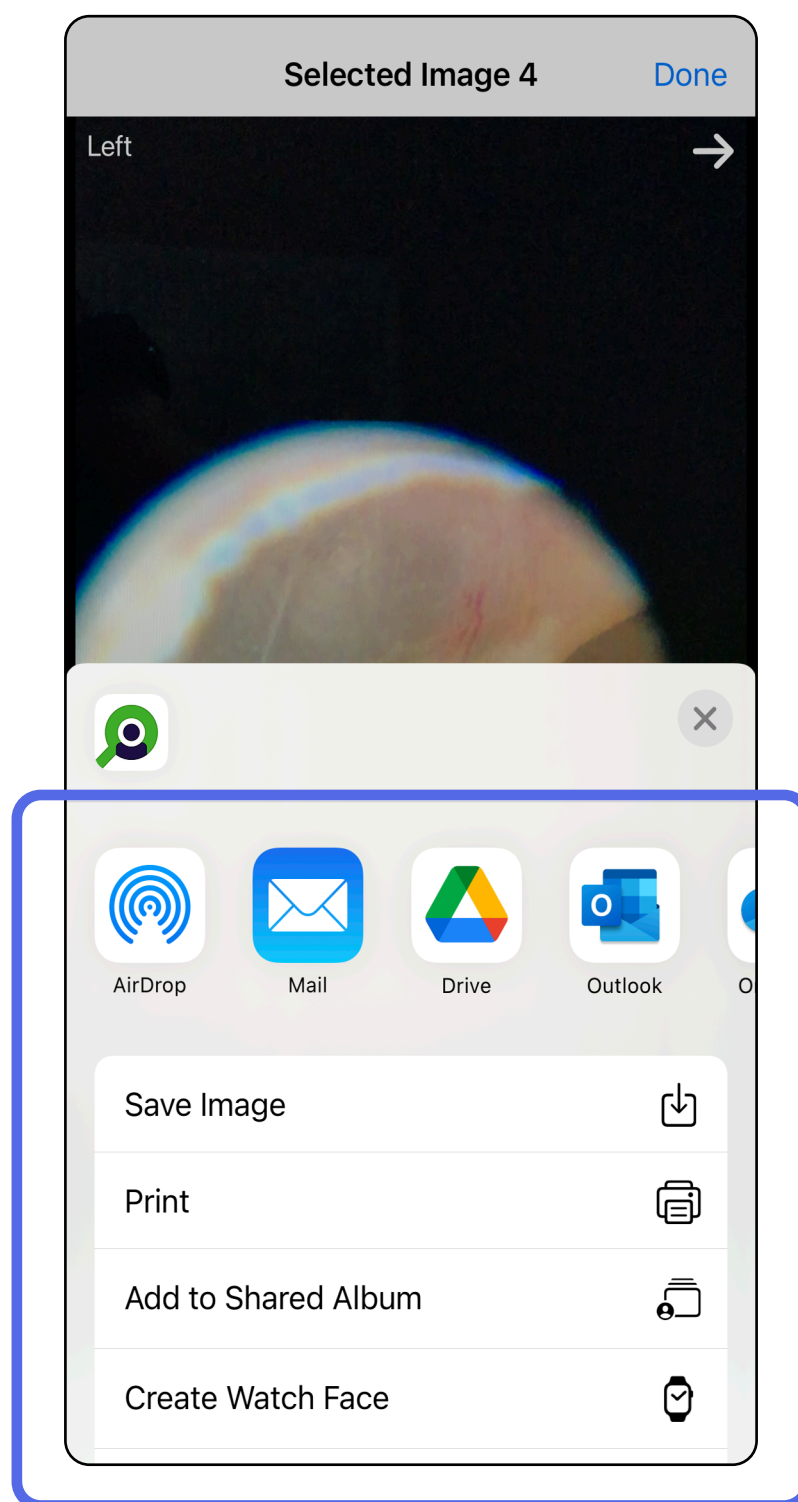

UWAGA Patrz [Urządzenie i dane pacjentów a bezpieczeństwo](#).



UWAGA Udostępniane obrazy z aplikacji iExaminer mogą zawierać wbudowane dane. Niektóre aplikacje do przeglądania zdjęć nie obsługują wbudowanych danych. Jeśli odbiorca nie może wyświetlić zdjęcia, wówczas powinien sprawdzić, czy aplikacja do przeglądania zdjęć obsługuje wyświetlanie obrazów z wbudowanymi danymi albo skorzystać z innej aplikacji do przeglądania zdjęć.

Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*


Usuwanie badania (iOS)

Dotyczy: trybu szkoleniowego


Istnieją dwie opcje usuwania badania.

Opcja 1: usunięcie przeciągnięciem

1. Aby usunąć zapisane badanie, przesunąć w lewo po nazwie zapisanego badania.
2. Dotknąć **Delete** (Usuń), aby potwierdzić.

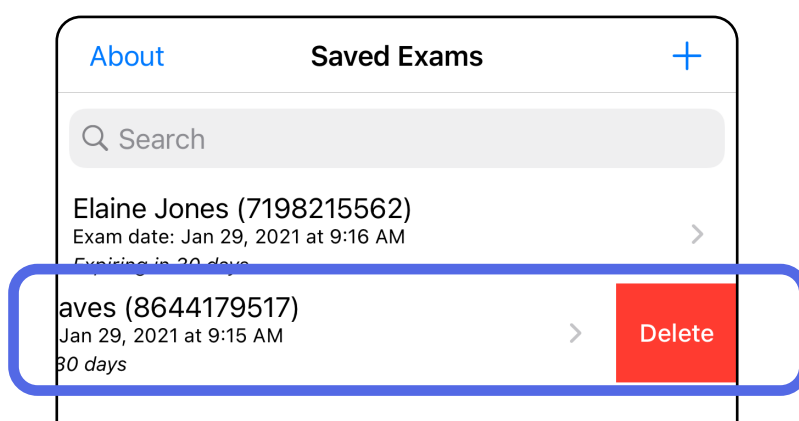

3. W oknie podręcznym dotknąć opcji **OK**, aby potwierdzić.

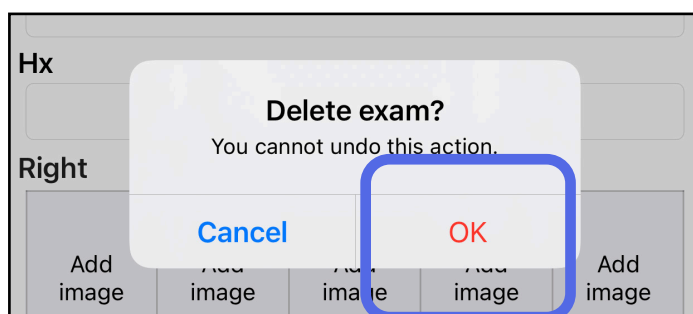


Opcja 2: wyświetlenie badania

1. Aby usunąć zapisane badanie, należy je wyświetlić, a następnie dotknąć ikony .



2. W oknie podręcznym dotknąć opcji **OK**, aby potwierdzić.

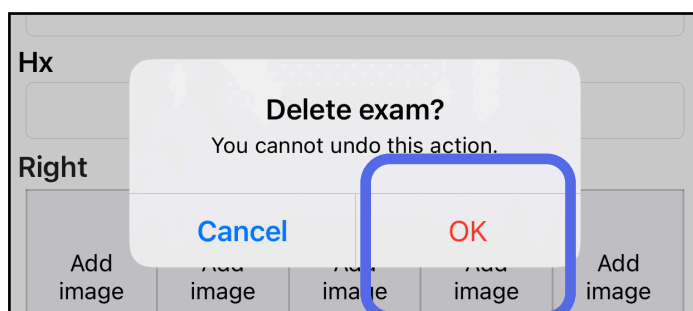


UWAGA Usuniętego badania nie można odzyskać.

Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*


Odrzucanie badania (iOS)

Dotyczy: trybu klinicznego

1. Aby odrzucić badanie, dotknąć **New** (Nowe).

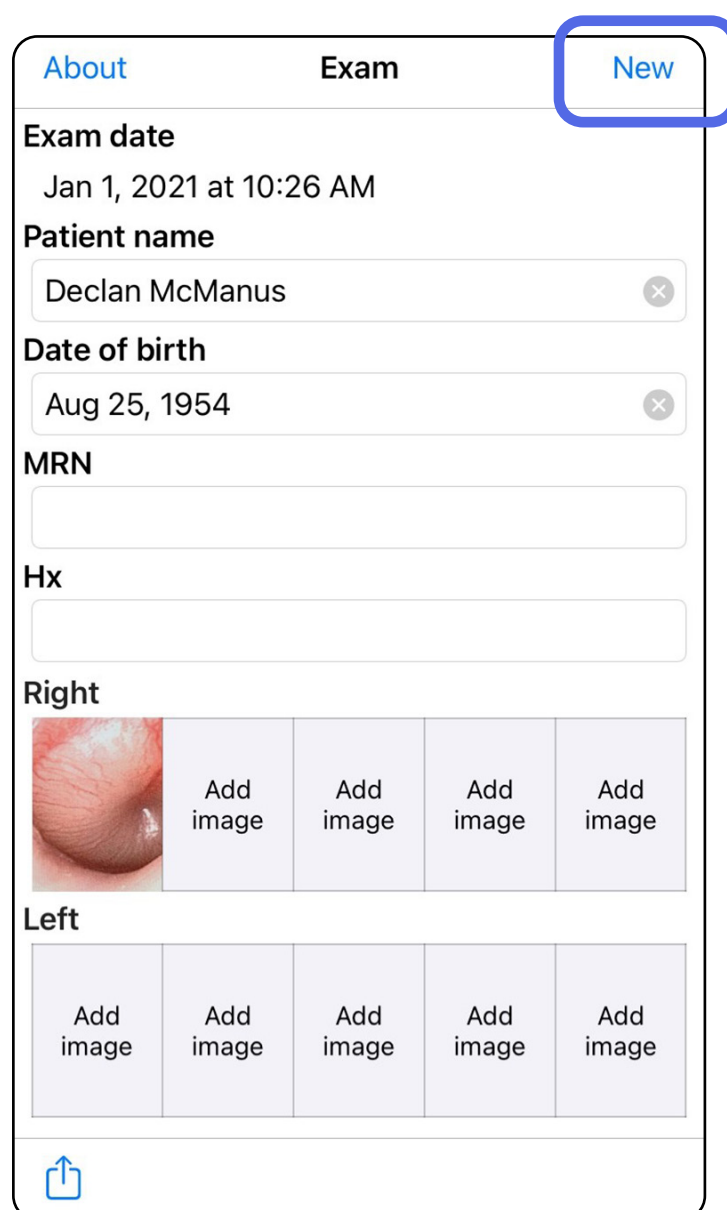

2. Dotknąć **OK**, aby odrzucić zmiany i rozpocząć nowe badanie.

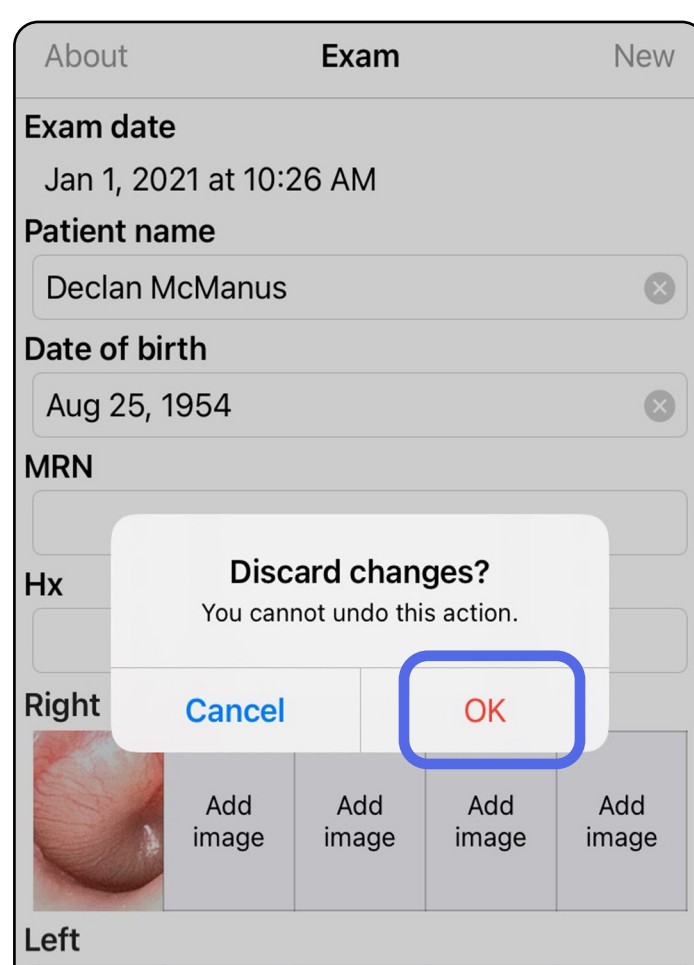

Przejdź do listy *Korzystanie z funkcji aplikacji*

Czyszczenie

Wskazówki dotyczące czyszczenia odnoszą się do nakładki SmartBracket i uchwytu SmartClip. Instrukcje dotyczące przygotowania wyrobów firmy Welch Allyn do ponownego użycia znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi.

 **PRZESTROGA** Nakładki SmartBracket i uchwytu SmartClip nie należy sterylizować ani zanurzać w jakimkolwiek roztworze.

Niniejszy produkt poza czyszczeniem nie wymaga żadnej innej konserwacji zapobiegawczej.

Dopuszczone do stosowania środki czyszczące:

- roztwór 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody demineralizowanej (na przykład ściereczki nasączone roztworem alkoholu CiDehol® 70)
 - Metrex™ CaviWipes®
 - PDI Super-Sani-Cloth®
 - PDI-Sani-Cloth Plus®
1. Przed czyszczeniem odłączyć SmartBracket od nakładki i uchwytu SmartClip. Pozostawić uchwyt SmartClip zamocowany do obudowy.
 2. Przetrzeć nakładkę SmartBracket i uchwyt SmartClip, używając dopuszczonych do stosowania chemicznych środków czyszczących (patrz powyżej), aby usunąć wszystkie widoczne i niewidoczne zabrudzenia. Częstość: czyścić według potrzeb.
 3. Poczekać, aż roztwór czyszczący wyschnie.

Bezpieczna utylizacja

SmartBracket i SmartClip utylizować zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia zawartymi w tej części instrukcji obsługi.
2. Przestrzegać zasad segregacji materiałów do recyklingu.
 - Rozmontować podzespoły i poddać je recyklingowi zależnie od rodzaju materiału.
 - o Plastikowe elementy poddać recyklingowi jako odpady plastikowe.
 - o Metalowe elementy poddać recyklingowi jako metale.
 - Dotyczy to również śrub i łączników.

Instrukcja obsługi odpowiedniej nakładki zawiera instrukcje dotyczące utylizacji odpadów.

Przestrzegać instrukcji producenta dotyczących utylizacji smartfona i obudowy. W celu zachowania poufności usunąć wszystkie zgromadzone na urządzeniu dane dotyczące pacjentów/szpitala/przychodni/lekarza. Przed usunięciem danych można wykonać ich kopię zapasową.

Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich przepisów krajowych, wojewódzkich, regionalnych lub miejscowych w zakresie bezpiecznej utylizacji wyrobów i akcesoriów medycznych. W razie wątpliwości użytkownik powinien najpierw skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Hillrom w celu uzyskania wskazówek dotyczących protokołów bezpiecznego usuwania.

Zgodność elektromagnetyczna

Informacje na temat zgodności elektromagnetycznej (EMC) można znaleźć na stronie firmy Hillrom pod adresem: hillrom.com/getstarted.

Przechowywanie i transport

Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi odpowiedniego wyrobu firmy Welch Allyn.

Rozmiar piksela

Rozmiar piksela na dnie oka w przypadku prawidłowej refrakcji oka przy ogniskowej 17 mm różni się w zależności od smartfona. Więcej informacji zawiera poniższa lista.

Rozmiar piksela	Smartfon
2,02 mikrona	iPhone X
2,01 mikrona	iPhone 11 Pro
2,02 mikrona	iPhone 11 Pro Max
2,06 mikrona	iPhone 12 Pro

Zgodność

Zgodność z normą ISO 10940:2009.

Akcesoria

Więcej informacji na temat akcesoriów i części mających kontakt z ciałem pacjenta można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi wyrobów firmy Welch Allyn.

Zgodne urządzenia

Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi odpowiedniego wyrobu firmy Welch Allyn.

Gwarancja

Firma Welch Allyn, Inc. gwarantuje, że produkty Welch Allyn iExaminer SmartBracket i SmartClip będą wolne od pierwotnych wad materiałowych i wad wykonania oraz że będą działać zgodnie ze specyfikacją producenta przez okres jednego roku od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad urządzenia albo jego niezgodności ze specyfikacją producenta, firma Welch Allyn naprawi lub wymieni urządzenie albo jego elementy bez dodatkowych kosztów dla nabywcy. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie nowych urządzeń Welch Allyn iExaminer SmartBracket i SmartClip zakupionych od firmy Welch Allyn albo jej autoryzowanych dystrybutorów czy przedstawicieli. Nabywca jest zobowiązany zwrócić wyroby SmartBracket i SmartClip bezpośrednio firmie Welch Allyn albo jej autoryzowanemu dystrybutorowi bądź przedstawicielowi oraz ponieść koszty wysyłki.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani awarii powstałych w wyniku ingerencji w urządzenie, niewłaściwego użycia, zaniedbania, wypadków, modyfikacji czy powstałych podczas wysyłki. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane zgodnie z zaleceniami producenta albo w przypadku dokonywania jego napraw.